



RU ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОРТЕЗ ТУЛОВИЩА

BG РЪКОВОДСТВО
ОРТЕЗА ЗА ТОРЦ

HR KORISNIČKE UPUTE
POTPORA ZA TRUP

CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PODPORA TRUPU

DK BRUGSANVISNING
TORSOORTOSE

EE KASUTUSJUHEND
TORSO TUGI

IE LÁMHLEABHAR ÚSÁIDEORA
TACA CABHLACH

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LIEMENS ĮTVARAS

NL HANDLEIDING
TORSO-ONDERSTEUNING

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
ORTÉZA TRUPU

SI NAVODILA ZA UPORABO
PODPORA TELESU

SE BRUKSANVISNING
RYGGSTÖD

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HÁTMERÉVÍTŐ

IT MANUALE UTENTE
SUPPORTO PER IL BUSTO

RO MANUAL DE UTILIZARE
SUPPORT TRUNCHI


LV LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
ĶĒRMEŅA BALSTS

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΡΜΟΥ

SA دليل الاستخدام
مقوam الجذع

PROIZVODITEL' / PROIZVODITEL / PROIZVOĐAČ /
VÝROBCE / FABRIKANT / TOOTJA / DÉANTÓIR / GAMINTOJAS /
FABRIKANT / VÝROBCA / PROIZVAJALEC / TILLVERKARE /
GYÁRTÓ / PRODUTTORE / PRODUCĂTOR / RAŽOTAJŠ /

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

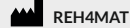

36-060 Głogów Małopolski
ul. Piaski 47, POLAND

Mailing address

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra,
37-500 Jarosław, POLAND
tel. +48 16 621 42 20 wew. 3
tel. +48 16 621 41 35 wew. 3
fax: +48 16 621 42 13

e-mail: biuro@reh4mat.com, export@reh4mat.com
www.reh4mat.com, www.probraces.com

Wytwórca posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 13485.

The manufacturer holds the ISO 13485 international Quality Management System certificate.



МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ / МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ / MEDICINSKI
PROIZVOD / ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK / MEDICINSK VARE /
MEDITSINISEADE / TÁIRGE LEIGHIS / MEDICINOS PRIEMONÉ /
MEDISCH APPARAAT / ZDRAVOTNÍČKA POMŮCKA / MEDICINSKI
PRIPOMOČEK / MEDICINEKTEKNIŠK PRODUKT / EGÉSZSÉGÜGYI
TERMÉK / PRODOTTO MEDICO / DISPOZITIV MEDICAL /
MEDICINISKAIS IZSTRĀDĀJUMS / ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

UMDNS 18030

Data poslednej aktualizácie / Data na obnoveanie na
ръководството / Datum zadnje dopune korisničkih uputa / Datum
aktualizace manuálu / Dato for seneste ajourføring af brugsanvisningen /
Kasutusjuhendi uuendamise kuupäev / Data áthbheithniú an
lámhleabhair / Instrukcija atnaujinta / De laatste datum van de
gebruikershandleiding / Dátum aktualizácie používateľskej príručky /
Datum posodobitve uporabniškega priročnika / Uppdateringsdatum /
Az utasítás frissítésének dátuma / Data di revisione del manuale / Data
actualizării manualului de utilizare / Rokasgrāmatas pārskatīšanas datums
/ Ημερομηνία αναθεώρησης του εγχειριδίου:

05.12.2022

Символ инструкции / Символ на ръководството / Simbol korisničkih
uputa / Symboly uživatelského manuálu / Sprugodgave / Kasutusjuhendi
sümbol / siombail an lámhleabhair / Instrukcijos simbolis / Symbol van
de gebruikershandleiding / Symbol uživatelskej príručky / Simboli
uporabniških navodil / Symbol / Az utasítás jelzése / Simbolo del manuale
/ Simbolul manualului de utilizare / Rokasgrāmatā izmantotie simboli /
Σύμβολο εγχειριδίου:

32/U/L/2

Ортезы Reh4Mat это современные и инновационные изделия, изготовленные очень старательно из материалов самого лучшего качества. Нашей главной целью является удовлетворенность пациентов. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с продавцом или непосредственно с работником фирмы Reh4Mat по электронной почте, по адресу: export@reh4mat.com.

ПОКАЗАНИЯ:

Орtez туловища стабилизирует и разгружает туловище и позвоночник. Орtez способствует компрессии и стабилизации грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника. Применяется при рвматических, неврологических и ортопедических заболеваниях.

КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ:

- Чистку продукта следует проводить систематически, не реже одного раза в месяц или чаще, если необходимо, в соответствии с рекомендациями производителя, обеспечивая ему надлежащее состояние.
- Перед каждым использованием продукт следует тщательно проверять на целостность, отсутствие повреждений, трещин, деформаций, а также на то, что все движущиеся части (если есть) полностью перемещаются и не заедают.
- Если изделие оснащено боковыми шинами, блестящими и их можно легко удалить без помощи инструментов, перед стиркой изделия следует их снять.
- Стирать вручную в теплой воде с мылом в температуре 30°С.
- Использовать после полного высыхания.
- Не мыть и стирать диск, не гладить, не обрабатывать хлоркой, не применять химическую обработку, не стирать в стиральной машине.
- Изделие следует хранить в чистом и сухом помещении.
- Хранить в сухом месте, не подвергать воздействию источников высокой температуры, сушить вдали от источников тепла.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не использовать изделие без консультации с лечащим врачом или терапевтом.
- Не использовать изделие не подходящего размера. Только правильно подобранный размер в соответствии с таблицей размеров, указанной на упаковке продукта и в информационных материалах производителя, гарантирует эффективность и безопасность.
- Не следует Давать детям и лицам с ограниченным сознанием без присмотра опекуна.
- Особенно следует проконтролировать правильность применения ортеза у детей, больных с расстройствами памяти, душевнобольных и пациентов с нарушениями ощущения.
- Особенно следует проконтролировать правильность применения ортеза у детей, больных с расстройствами памяти, душевнобольных и пациентов с нарушениями ощущения. Кожный покров в местах прилегания ортеза должен быть чистым (непосредственно перед использованием ортезом не применять мази, кремы, лекарственные компрессы).
- В случае сопутствующих варикозных заболеваний, воспаления глубоких вен в прошлом, отеков нижних или верхних конечностей, применение ортеза возможно исключительно после консультации лечащего врача.
- Не следует использовать изделие не по назначению.
- Не используйте продукт, если он деформирован или поврежден.
- Не следует Принимать попытки самостоятельного отремонтировать изделие. Самостоятельно вмешательство в конструкцию продукта может нанести непоправимый вред здоровью пользователя.
- Не следует использовать аксессуар, не рекомендованные производителем.
- Не использовать изделие возле открытого огня или на горячей поверхности. Это может серьезно травмировать пользователя и привести к серьезному ущербу для здоровья.
- Одевать ортез на ночь можно только по рекомендации лечащего врача.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- **Внимание!** Настоящая инструкция содержит основные сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия, способа очистки и ухода.
- **Внимание!** Перед использованием изделия пользователь обязан ознакомиться с настоящей инструкцией. Соблюдение данной инструкции обеспечит безопасное использование изделия, а также продлит его срок службы. В случае сомнений следует проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.
- **Внимание!** Применение изделия не согласно указаний в инструкции грозит серьезными осложнениями.
- **Внимание!** Оно должно храниться в легко доступном месте.
- **Внимание!** Каждый раз перед использованием изделием, следует проверить его на наличие потертых элементов и швов. В случае повреждения изделия, необходимо прекратить его применение и отправить его на адрес производителя. Только неповрежденное изделие и его правильное использование гарантируют надлежащее функционирование изделия.
- **Внимание!** Производитель несет ответственность только за скрытые дефекты или повреждения, возникшие в результате нормального использования в результате производственных дефектов изделия.
- **Внимание!** Производитель несет ответственность за надлежащее функционирование изделия только в том случае, если оно приобретено у официального дистрибутора или в специализированном магазине.
- **Внимание!** Боль всегда является предостережением. В случае длительных или усиливающихся болевых ощущений, необходимо обратиться к лечащему врачу или реабилитанту.
- **Внимание!** Ортезом следует пользоваться исключительно одним пациентом.
- **Внимание!** Ортезом следует пользоваться согласно указаниям врача или реабилитанта.
- Перед первым использованием убедитесь, что размер продукта правильно выбран в соответствии с таблицей размеров. Ортез правильно функционирует при условии выбора соответственного размера. Неправильный подбор размера снижает эффективность терапии, может вызвать дискомфорт и привести к возникновению неправильной позиции тела во время использования. Ортез Reh4Mat должен подбирать лечащий врач, специализированный продавец или реабилитант.
- Особенно следует проконтролировать правильность применения ортеза у детей, больных с расстройствами памяти, душевнобольных и пациентов с нарушениями ощущения.
- Кожный покров в местах прилегания ортеза должен быть чистым (непосредственно перед использованием ортезом не применять мази, кремы, лекарственные компрессы). Необходимо систематически проверять состояние кожного покрова: в случае появления каких-либо кожных изменений в местах прилегания ортеза, обязательно обратиться к лечащему врачу.
- Длительное применение ортеза может привести к ограничению активных и пассивных движений в суставах. Если не противопоказано, рекомендуется несколько раз в сутки выполнять пассивные упражнения. Упражнения подбираются магистром или техником-реабилитантом индивидуально для каждого пациента по назначению лечащего врача.
- В случае сопутствующих варикозных заболеваний, воспаления глубоких вен в прошлом, отеков нижних или верхних конечностей, применение ортеза возможно исключительно после консультации лечащего врача.
- Перед использованием удалите всю упаковку (бумагу, пластик), отрезанные вкладыши и картонные бирки.
- Не следует Давать детям и лицам с ограниченным сознанием без присмотра опекуна.
- Не следует использовать изделие неправильного размера.
- Не следует Давать детям и лицам с ограниченным сознанием без присмотра опекуна.
- Не следует Принимать попытки самостоятельного отремонтировать изделие.
- Не следует Самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
- Не следует использовать аксессуары, не рекомендованные производителем.



О любом серьезном инциденте, связанном с продуктом, необходимо сообщать производителю и компетентному органу государства в котором проживает пользователь или пациент.

Необходимо следовать СПОСОБУ НОШЕНИЯ, который прилагается к изделию.

Список всех запасных частей для выбранного продукта доступен для загрузки на сайте www.reh4mat.com.



Подтверждение соответствия продукта основным требованиям норм ЕС.

Производитель

Дата производства

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед

ВНИМАНИЕ

Бережть от солнечного света

Относительная влажность при хранении

Ограничение температуры хранения

Хранить в сухом месте

Упаковка пригодна для вторичной переработки.

Медицинское изделие

номер партии

Номер в каталоге

Упаковка пригодна для вторичной переработки.

Знак «Польский Капитал» подчеркивает местность происхождения продукта.

Продукт без химикатов

Продукт рекомендован специалистами

Благоприятный для кожи продукт

Инновационный продукт

максимальный эффект в минимальном продукте

Экологический продукт

Гипоаллергенный продукт

Прочный продукт

Продукт высшего медицинского снабжения

Описание на продукт Тази ортеза е отлично решение за ефективна терапия в случаи на травма или остеоартроза. Препоръчана е при RethMat за високо натоварени и претоварени от редица специалисти (лекари, физиотерапевти) и пациенти. Нашите продукти се произвеждат в Полша и са направени от висококачествени материали. Ако имате допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

ИНДИКАЦИИ:

Ортезата за торс осигурява стабилизация и облекчава гръбната мускулатура. Ортезата осигурява компресия и стабилизация на гръбначния стълб в торакалния, лумбалния и сакралния отдел. Използва се при ревматоидни, неврологични и ортопедични увреди и травми.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Продуктът трябва да бъде поддръжан чист според препоръките на производителя.
- Почистяйте продукта систематично, поне веднъж месечно или по-често ако се налага, според инструкциите и препоръките от производителя, като се уверите, че продукта е в добро състояние.
- Преди всяка употреба, продуктът трябва да се проверява внимателно за нарушения на целостта, пукнатини, деформации и дали всички движими елементи (ако има такива) се движат в правилния си обем.
- Използвайте на ръка с топла сапунена вода при температура от 30 градуса.
- Използвайте продукта само когато е напълно изсушен.
- Не гладете, не използвайте хлорин, не носете на химическо чистене, не сушете в сушилня.
- Съхранявайте в сухо и чисто помещение.
- Пазете от влага, високи температури, директна слънчева светлина, изсушавайте на източници на топлина.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

- Продуктът трябва да бъде използван според препоръките на лекар или физиотерапевт.
- Не използвайте продукта ако размерът му не е подходящ. Използвайте само правилно пасващи продукти, съгласно таблицата с размери, предоставена заедно с опаковката и информацията за материалите, гаранцията и инструкциите за безопасност.
- При деца с психични разстройства не използвайте продукта без контрола на настройник/придружител
- Не използвайте продукта про пациенти с увреди на суперфициална или дълбока чувствителност без наблюдение от специалист.
- Кожният участък, върху който ще се поставя продукта трябва да бъде добре почистен. Следете състоянието на кожата, в случай на образуване на лезии се свържете с лекар.
- В случаи на разширени вени, дълбока венозна тромбоза и отоци се посъветвайте с лекар преди употребата на ортеза.
- Използвайте продукта според предназначението му.
- Не използвайте продукта в случаи на повреда или деформация.
- Не се опитвайте да сервизирате продукта самостоятелно. Проманята на дизайна на продукта може да доведе до неговата повреда или да има последствия за здравето на ползвателя.
- Не използвайте аксесоари които не са препоръчани от производителя.
- Не използвайте продукта в близост до пламъци или горещи повърхности. Това може да причини сериозни увреди на потребителя и неговото здраве
- Употребата на ортезата през ноща трябва да бъде извършвана само след лекарско предписание.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- **Внимание!** Това ръководство съдържа основна информация необходима за правилната и безопасна употреба и поддръжка на продукта.
- **Внимание!** Преди да използвате продукта, прочетете внимателно ръководството за употреба. Спазването на инструкциите за употреба осигурява безопасността и ефективността на продукта. Ако имате въпроси, моля консултирайте се със специалист.
- **Внимание !** Неспазване на инструкциите за употреба могат да доведат до сериозни усложнения.
- **Внимание !** Запазете инструкциите за бъдещи справки.
- **Внимание !** Проверете състоянието на продукта. Ако той е повреден, прекратете употребата му и се свържете с производителя. Само употребата на изправен продукт в съответствие с ръководството, могат да гарантират неговата безопасна и правилна работа.
- **Внимание!** Производителя не носи отговорност за скрити дефекти на продуктите или за механични травми върху тях случили се в следствие на нормална употреба.
- **Внимание!** Производителя носи отговорност за неговата ефективност и безопасност само в случай, че продукта е закупен от оторизиран представител.
- **Внимание!** Болката винаги е знак за предупреждение. Ако болката си остава същата или се увеличава, трябва да се консултирате с лекар или физиотерапевт.
- **Внимание !** За индивидуална употреба.
- **Внимание!** Продуктът трябва да бъде използван според препоръките на лекар и физиотерапевт.
- Преди първоначална употреба, проверете размера на продукта. Правилният размер гарантира безопасна и ефективна употреба. Грешният размер може да намали ефективността от терапията, да увеличи дискомфорта и грешно да позиционира ползвателя. Правилната употреба и размер се препоръчва от вашият лекар или физиотерапевтът ви.
- При деца с психични разстройства не използвайте продукта без контрола на настройник/придружител.
- Кожният участък, върху който ще се поставя продукта трябва да бъде добре почистен. Следете състоянието на кожата, в случай на образуване на лезии се свържете с лекар.
- В случаи на разширени вени, дълбока венозна тромбоза и отоци се посъветвайте с лекар преди употребата на ортеза.
- Преди употреба премахнете опаковката и други аксесоари като документи, етикети и др.
- Използвайте продукта според предназначението му.
- Не използвайте продукта ако размерът му не е подходящ.
- При деца с психични разстройства не използвайте продукта без контрола на настройник/придружител.
- Не използвайте продукта в случаи на повреда или деформация.
- Не се опитвайте да сервизирате продукта самостоятелно.
- Не използвайте аксесоари които не са препоръчани от производителя.

О любом серьёзном инциденте, связанном с устройством, необходимо сообщить производителю и компетентному органу государства, в котором проживает пользователь или пациент.
Необходимо следовать СПОСОБУ НОШЕНИЯ, который прилагается к изделию.
Список всех запасных частей для выбранного продукта доступен для загрузки на сайте www.reh4mat.com.

	Подтверждение соответствия продукта основным требованиям норм ЕС.
	Производитель
	Дата на производство
	Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием
	ВНИМАНИЕ
	Бережь от солнечного света
	Относительная влажность при хранении
	Ограничение температуры хранения
	Хранить в сухом месте
	Упаковка пригодна для вторичной переработки.
	Медицинское изделие
	номер партии
	Номер в каталоге
	Упаковку выбросить в мусорное ведро.
	Знак «Польский Капитал» подчеркивает местность происхождения продукта.
	Продукт без химикатов
	Продукт рекомендован специалистами
	Благоприятный для кожи продукт
	Инновационный продукт
	максимальный эффект в минимальном продукте
	Экологический продукт
	Гипоаллергенный продукт
	Прочный продукт
	Продукт быстрого медицинского снабжения

Ortoza je odlično rješenje za uspješnu terapiju nakon ozljede ili drugih stanja. Reh4Mat proizvodi cijeni su i preporučaju ih stručnjaci (liječnici, fizioterapeuti) i pacijenti. Naši su proizvodi proizvedeni u Poljskoj od visoko kvalitetnih materijala. Ukoliko imate dodatnih pitanja, budite slobodni kontaktirati nas: export@reh4mat.com.

INDIKACIJE:

Potpora za trup omogućuje stabilizaciju i olakšanje u trupu I kralježnici. Potpora stvara kompresiju I stabilizaciju torakalnog, lumbalnog I sakralnog segmenta kralježnice. Koristi se kod reumatoloških, neuroloških I ortopedskih ozljeda I poremećaja.

ZBRINJAVANJE I ODRŽAVANJE

- Proizvod je preporučeno skladištiti u čistom i suhom prostoru i koristiti prema uputama proizvođača.
- Proizvod čistite redovito, barem jednom mjesečno (ili više ako za istim postoji potreba). Preporuka je proizvođača da se pazi na stanje proizvoda.
- Ako na proizvodu postoje lateralne udlage ili zglobovi koje je moguće skinuti bez alata prije pranja/čišćenja proizvoda, potrebno ih je skinuti prije pranja.
- Prati na ruke u toploj vodi na temperaturi do 30°C.
- Sušite pažljivo, a možete ju koristiti tek kada se potpuno osuši.
- Ne smije se peglati, korirati niti sušiti u sušilici.
- Skladištiti na suhom i čistom mjestu.
- Zaštititi od vlage, visoke temperature, sunčeve svjetlosti.

KONTRAINDIKACIJE

- Proizvod je potrebno koristiti prema uputama liječnika ili fizioterapeuta.
- Proizvod se ne smije koristiti u pogrešnoj veličini. Samo ispravna veličina, usuglašena s tablicom veličina (čije se mjere nalaze na pakiranju proizvoda) te informacije proizvođača o materijalu garantiraju efektivnost i sigurnost prilikom korištenja proizvoda.
- Proizvod ne smiju koristiti djeca ili odrasli sa poteškoćama u razvoju bez prisutnosti roditelja ili skrbnika.
- Proizvod ne smiju koristiti osobe s poremećajem površinskog ili dubinskog osjeta bez prisutnosti roditelja ili skrbnika.
- Koža mora biti suha na mjestu gdje se proizvod primjenjuje. Kontrolirajte stanje kože te ukoliko se pojave lezije, potrebno je potražiti savjet liječnika.
- U slučaju postojanja varikoziteta vena, duboke venske tromboze ili edema korištenje ortoze je dozvoljeno samo po preporuci liječnika.
- Ne koristite proizvod protivno uputama za korištenje.
- Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja ili promjene oblika.
- Ne pokušavajte popravljati proizvod samostalno.
- Samostalno uplitanje u dizajn I strukturu proizvoda može rezultirati trajnim oštećenjem ili može biti opasno po korisnikovo zdravlje.
- Ne koristite dodatke koji nisu propisani od strane proizvođača.
- Ne koristite proizvod u blizini plamena ili vruće površine. Moglo bi doći do ozbiljnih ozljeda korisnika.
- Korištenje ortoze tokom noći trebalo bi biti propisano od strane liječnika

PRAVILA SIGURNOSTI

- **Upozorenje!** Ovaj priručnik sastoji se od osnovnih informacija potrebnih za ispravno i sigurno korištenje proizvoda, održavanje i čišćenje.
- **Upozorenje!** Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitatte priručnik. Slijedeći upute koje se nalaze u priručniku garantirana je sigurnosti I učinkovitost proizvoda.Ukoliko imate kakvih pitanja, kontaktirajte pružatelja zdravstvene njege.
- **Upozorenje!** Korištenje proizvoda protivno korisničkim uputama može doći do ozbiljnih problema.
- **Upozorenje!** Spremite priručnik za buduće korištenje.
- **Upozorenje!** Provjerite stanje proizvoda. Ako je proizvod oštećen, prekinite korištenje I kontaktirajte proizvođača. Samo predmet koji nije oštećen I ima pravovaljano jamstvo je proizvod siguran za korištenje.
- **Upozorenje!** Proizvođač je odgovoran za skrivena oštećenja proizvoda ili za mehaničke nedostatke koji se pojavljuju prilikom korištenja proizvoda.
- **Upozorenje!** Proizvođač je odgovoran za učinkovitost I sigurnost proizvoda, ali samo ukoliko je proizvod kupljen kod ovlaštenog prodavača.
- **Upozorenje!** Bol je uvijek znak za zabrinutost. Ako se bol pojačava ili je konstantna, preporuča se kontaktirati fizioterapeuta ili liječnika.
- **Upozorenje!** Koristiti proizvod samo na jednom pacijentu.
- **Upozorenje!** Proizvod je potrebno je koristiti prema uputama I preporukama liječnika ili fizioterapeuta.
- yPrije prve upotrebe provjerite veličinu proizvoda. Sama prava veličina osigurana sigurnost i učinkovitost. Pogrešna veličina proizvoda umanjuje učinkovitost terapije, a povećava razinu neugodnosti te pogrešnog korištenja. Pravilno korištenje ortoze prema dijagnozi određuju fizioterapeut ili liječnik.
- Proizvod ne smiju koristiti djeca ili odrasli sa poteškoćama u razvoju bez prisutnosti roditelja ili skrbnika. Proizvod ne smiju koristiti osobe s poremećajem površinskog ili dubinskog osjeta bez prisutnosti roditelja ili skrbnika.
- Koža mora biti suha na mjestu gdje se proizvod primjenjuje. Kontrolirajte stanje kože te ukoliko se pojave lezije, potrebno je potražiti savjet liječnika.
- U slučaju postojanja varikoziteta vena, duboke venske tromboze ili edema korištenje ortoze je dozvoljeno samo po preporuci liječnika.
- Prije korištenja proizvoda, skinite pakiranje I dodatke kao što su papiri, kartice ili etikete s podacima proizvoda.
- Prije korištenja proizvoda, skinite pakiranje I dodatke kao što su papiri, kartice ili etikete s podacima proizvoda.
- Ne koristite proizvod protivno uputama za korištenje.
- Proizvod se ne smije koristiti u pogrešnoj veličini.
- Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja ili promjene oblika.
- Ne pokušavajte popravljati proizvod samostalno.
- Ne koristite dodatke koji nisu propisani od strane proizvođača.

Ozbiljne posljedice korištenja ili nedostaci proizvoda trebali bi biti prijavljeni proizvođaču I ovlaštenom prodavaču.
Molimo da slijedite upute za postavljanje koje se nalaze na proizvodu.
Lista dostupnih rezervnih dijelova nazali se na www.reh4mat.com za svaki pojedini proizvod.

	Deklaracija da proizvod zadovoljava sve neophodne potrebe.
	Proizvođač
	Datum proizvodnje
	Molimo pročitatte upute prije korištenja
	Upozorenje!
	Zaštitite od sunčeve svjetlosti
	Skladištiti na relativno vlažnom mjestu
	Skladištiti na mjestu ograničene temperature
	Skladištiti na suhom mjestu
	Упаковка Pakiranje proizvoda može se reciklirati
	Medicinski proizvod
	Lota broj
	Kataloški broj
	Pakiranje je potrebno baciti u za to predviđeno mjesto.
	Znak „Polish Capital” naglašava lokalitet proizvoda.
	Proizvod oslobođen kemijskih utjecaja
	Proizvod preporučaju specijalisti
	Proizvod nije štetan za korištenje na koži
	Inovacija
	Manja veličina, veća učinkovitost proizvoda
	Ekološki osvješten proizvod
	Hipoalergeni proizvod
	Izdržljiv proizvod
	Proizvod namijenjen za korištenje u odjelima Hitne pomoći

Ortýzy jsou perfektní řešení pro efektivní léčbu v případě poranění či jiných stavů. Reh4Mat výrobky jsou oceňovány a doporučovány specialisty (lékaři, fyzioterapeuti) a pacienti. Naše výrobky jsou vyrobeny v Polsku z vysoké kvalitní materiálu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat: export@reh4mat.com.

INDIKACE:

Ortýza trupu stabilizuje a odlehčuje trup a páteř. Ortýza poskytuje kompresi a stabilizaci hrudní, bederní a sacrální paterě. Užívá se v případě reumatologických, ortopedických a neurologických onemocnění a při úrazech.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Výrobek má být udržován v čistotě a používán dle doporučení výrobce.
- Výrobek čistěte systematicky, nejméně jednou za měsíc nebo častěji, je-li to nezbytné, v souladu s doporučeními výrobce, aby bylo zajištěno udržení výrobku v dobrém stavu.
- Pokud výrobek obsahuje postranní dílky nebo peloty, které je možno demontovat bez použití náčiní, odstraňte je před praním.
- Perte v ruce v teplé vodě s mýdlem při teplotě 30°C.
- Použijte až po celkovém vyschnutí.
- Věšetek neperete, nežehlete, nebělte, nečistěte chemicky, nesušte v sušičce.
- Udržujte v suchu a čistotě.
- Chraňte před vlhkem, extrémní teplotou, slunečním světlem, sušte mimo tepelné zdroje.

KONTRAINDIKACE

- Výrobek používejte pouze podle doporučení lékaře či fyzioterapeuta.
- Nepoužívejte výrobek nesprávné velikosti. Pouze správně zvolená velikost, shodně s tabulkou velikostí, dostupnou na obalu výrobku a v informačních materiálech výrobce, zaručuje efektivitu a bezpečnost.
- Nepoužívejte výrobek u osob a dětí s mentálními poruchami bez dozoru opatrovníka.
- Nepoužívejte výrobek u pacientů s poruchami povrchového a hlubokého číti bez dozoru opatrovníka.
- Neaplikujte výrobek na neočištěnou pokožku. Kontrolujte stav pokožky. V případě výskytu kožních lézí je nezbytné kontaktovat lékaře.
- V případě varikozních žil, hluboké žilní trombozy či otoku je používání ortýzy povoleno pouze po konzultaci s lékařem.
- Nepoužívejte výrobek způsobem, pro který není určený.
- Nepoužívejte výrobek v případě jeho poškození nebo tvarové deformace.
- Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat.
- Neodborné zásahy do konstrukce výrobku mohou mít za následek trvalé poškození zdraví uživatele.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo horkých povrchů. To by mohlo mít za následek vážné poranění uživatele a vážné poškození zdraví.
- Používání ortýzy v noci je možné pouze po předchozí konzultaci s lékařem nebo terapeutem.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Pozor!** Tento manuál obsahuje základní informace nezbytné pro správné a bezpečné používání výrobku, údržbu a čištění.
- Pozor!** Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Následující pokyny obsažené v manuálu poskytují bezpečnost a efektivitu výrobku. Pokud máte nějaké dotazy, prosíme, konzultujte vašeho poskytovatele zdravotních služeb.
- Pozor!** Používání výrobku neshodně s tímto manuálem může mít za následek vážné komplikace.
- Pozor!** Tento manuál si pečlivě uschovejte.
- Pozor!** Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud je výrobek poškozen, přerušete jeho používání a kontaktujte výrobce. Pouze nepoškozené výrobky a správné používání zaručují správné a bezpečné fungování.
- Pozor!** Výrobce odpovídá pouze za skryté vady nebo poškození vzniklá během pravidelného používání v důsledku výrobní vady.
- Pozor!** Výrobce odpovídá za správné fungování výrobku a jeho bezpečnost pouze v případě zakoupení výrobku u autorizovaného prodejce.
- Pozor!** Bolest je vždy varující příznakem. Pokud bolest přetrvává nebo se zvyšuje, je doporučeno konzultovat vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Pozor!** Použít pouze pro jednoho pacienta.
- Pozor!** Výrobek by měl být používán shodně s doporučením lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Před prvním použitím zkontrolujte velikost výrobku. Pouze správná velikost zaručuje bezpečnost a efektivitu. Špatná velikost výrobku snižuje efekt léčby, může působit dyskomfort a špatné postavení. Výrobek musí být vybrán ošetřujícím lékařem, specializovaným prodejcem nebo fyzioterapeutem.
- Nepoužívejte výrobek u osob a dětí s mentálními poruchami bez dozoru opatrovníka.
- Neaplikujte výrobek na neočištěnou pokožku. Kontrolujte stav pokožky. V případě výskytu kožních lézí je nezbytné kontaktovat lékaře.
- V případě varikozních žil, hluboké žilní trombozy či otoku je používání ortýzy povoleno pouze po konzultaci s lékařem.
- Před použitím odstraňte obal a příslušenství jako papíry, krabice nebo nálepky.
- Nepoužívejte výrobek způsobem, pro který není určený.
- Nepoužívejte výrobek nesprávné velikosti.
- Nepoužívejte výrobek u osob a dětí s mentálními poruchami bez dozoru opatrovníka.
- Nepoužívejte výrobek v případě jeho poškození nebo tvarové deformace.
- Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

Vážné příhody spojené s výrobkem musí být nahlášený výrobcí a kompetentním autoritám ve vaší zemi.

Prosíme postupujte podle INSTRUKCÍ dodaných s výrobkem.

Seznam dostupných náhradních dílů pro vybrané výrobky naleznete na www.reh4mat.com.

	Prohlášení, že výrobek splňuje základní požadavky.
	Výrobce.
	Datum výroby.
	Prosíme před použitím si přečtete pokyny v manuálu.
	Pozor!
	Chraňte před sluncem.
	Relativní vlhkost při skladování.
	Limitovaná teplota při skladování.
	Skladujte v suchu.
	Obal je recyklovatelný
	Zdravotnický prostředek
	Číslo šarže
	Katalogové číslo
	Obal by měl být hozen do koše
	Symbol polského hlavního města zdůrazňuje lokalitu
	Výrobek bez chemikálií
	Doporučeno specialisty.
	Přátelské k pokožce
	Inovativní výrobek
	Minimální přístroj, maximální efekt
	Ekologicky šetrný výrobek
	Hypoalergenní výrobek
	Odolný výrobek
	ER výrobek

Varer af mærket Reh4Mat er moderne og innovative produkter, som er fremstillet med passende omhu af materialer af højeste kvalitet. Vores hovedformål er direkte med at tilfredse patienter. I tilfælde af spørgsmål opfordrer vi til at kontakte forhandleren el. direkte medarbejderen i Reh4Mat pr. e-mail: export@reh4mat.com.

VARENS TILSIGTEDE FORMÅL:

En torsoortose har til formål at stabilisere og aflaste torsoen og ryggen. Ortoosen sikrer kompression og stabilisering af brystryggen, lænderyggen og det sakrale område. Den anvendes ved reumatiske, neurologiske el. ortopædiske lidelser.

VEDLIGEHOJDELSE OG OPBEVARING

- Varen skal holdes perfekt ren og bruges efter anvisningerne fra fabrikanten, som er anført i nærværende brugsanvisning.
- Produktet skal rengøres regelmæssigt, mindst én gang om måneden el. oftere, hvis det bliver nødvendigt, efter anvisningerne fra Fabrikanten, så det holdes i god stand.
- Hvis varen indeholder skinner el. beskyttelsesplinter, som let kan afmonteres, skal disse dele afmonteres inden vask påbegyndes.
- Håndvaskes i lunken vand tilsat sæbe ved en temperatur på 30°C.
- Skal skylles grundigt. Betrækket skal være helt tørt før det kan tages i brug igen.
- Må ikke stryges, klørbehandles, renses el. tørres i en tørretumbler.
- Varen skal opbevares et rent og tørt sted i en tryk- og vandtæt zone.
- Beskyttes mod fugt, må ikke udsættes for ekstreme temperaturer, tørres væk fra varmekilder.

KONTRAINDIKATIONER:

- For at kunne bruge varen, skal du først rådføre dig med din behandlende læge el. terapeut.
- Varen må ikke bruges i forkert størrelse. Dens effektivitet og sikkerhed kan kun garanteres, hvis den vælges i en passende størrelse, der fremgår af størrelsestabellen, som er anført på emballagen og informationsmaterialet fra fabrikanten.
- Børn, personer med hukommelsesproblemer, med reduceret bevidsthed el. psykiske sygdomme må ikke bruge varen uden opsyn.
- Personer med forstyrrelser af den eksterceptive og den proprioceptive sans må ikke bruge varen uden opsyn.
- Varen må ikke bruges på en uren hud. Hudens tilstand skal kontrolleres regelmæssigt under anvendelsen af produktet.
- Varen må ikke bruges af personer med hudlæsioner, koaguleringsforstyrrelser , hævelser og åreknuder på det sted, hvor den kommer i kontakt med huden, uden at vedkommende forudgående rådfører sig med den behandlende læge el. terapeut.
- Varen må ikke bruges på en måde, der strider imod formålet hermed.
- Do not use the product in case of damage or shape's deformation.
- Du må ikke selv forsøge at reparere varen el. foretage nogen som helst uautoriserede ændringer heri. Uautoriseret modificering af varens konstruktion kan medføre en varig sundhedsskade hos brugeren.
- Det er ikke tilladt at anvende tilbehør og løsninger, der frarådes af fabrikanten.
- Varen må ikke bruges i nærheden af åben ild el. på en varm overflade. Det kan medføre alvorlige kvæstelser og udgøre en alvorlig sundhedsfare.
- Ortoosen kan kun bruges om natten, hvis den behandlende læge har anvist dette.

SIKKERHEDSREGLER

- Bemærk!** Nærværende brugsanvisning indeholder de grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for at bruge varen korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger.
- Bemærk!** Inden varen tages i brug, skal nærværende brugsanvisning læses nøje igennem. Overholdelse af anvisningerne i nærværende brugsanvisning garanterer sikker brug af varen og forlænger dens anvendelsesperiode. Rådfør dig med din læge el. fysioterapeut i tvivlstilfælde.
- Bemærk!** Anvendelse af varen i strid med anvisningerne, som er indeholdt i denne brugsanvisning, kan medføre alvorlige komplikationer.
- Bemærk!** Nærværende brugsanvisning skal opbevares let tilgængeligt.
- Bemærk!** For hver anvendelse skal varen kontrolleres for eventuelle synlige skader, revner, løse sømme, deformationer el. andre fejl, som kan udgøre en fare for brugeren under driften. Du skal straks holde op med at bruge varen og kontakte fabrikanten, hvis du har konstateret nogen som helst skader herpå. Varens fejlfri funktion kan kun garanteres, hvis den er intakt og anvendes korrekt.
- Bemærk!** Fabrikanten har kun ansvaret for de skjulte fejl el. skader opstået ved korrekt anvendelse, der skyldes produktionsfejl.
- Bemærk!** Fabrikanten kan kun ansvaret for varens fejlfrie drift, hvis den er købt hos en autoriseret forhandler el. i specialbutikken.
- Bemærk!** Smerte er altid en advarsel. Hvis smerten fortsætter el. tiltager i styrke, skal du kontakte din behandlende læge el. fysioterapeut.
- Bemærk!** Produktet må kun anvendes af én patient.
- Bemærk!** Varen skal bruges efter anvisningerne fra lægen el. fysioterapeuten.
- Inden varen tages i brug, skal du tjekke, hvorvidt du har valgt passende størrelse, der fremgår af størrelsestabellen. Behandlingens sikkerhed og effektivitet kan kun garanteres, hvis varen er valgt i passende størrelse. Anvendelse af varen i en orkret størrelse reducerer behandlingseffektiviteten, kan give gener og føre til indtagelse af en forkert kropstilling under brugen heraf. Varens størrelse skal vælges af din behandlende læge, en specialuddannet ekspedient el. en fysioterapeut.
- Børn, personer med hukommelsesproblemer, med reduceret bevidsthed el. psykiske sygdomme må ikke bruge varen uden opsyn.
- Varen må ikke bruges på en uren hud. Hudens tilstand skal kontrolleres regelmæssigt under anvendelsen af produktet.
- Varen må ikke bruges af personer med hudlæsioner, koaguleringsforstyrrelser , hævelser og åreknuder på det sted, hvor den kommer i kontakt med huden, uden at vedkommende forudgående rådfører sig med den behandlende læge el. terapeut.
- Inden ortosen tages i brug, skal al emballage (papiremballage, plastemballage), indsyede labels, som skal klippes af, og papmærker, fjernes.
- Varen må ikke bruges på en måde, der strider imod formålet hermed.
- Varen må ikke bruges i forkert størrelse.
- Personer med forstyrrelser af den eksterceptive og den proprioceptive sans må ikke bruge varen uden opsyn.
- Varen må ikke bruges, hvis den er deformeret el. beskadiget.
- Du må ikke selv forsøge at reparere varen el. foretage nogen som helst uautoriserede ændringer heri.
- Det er ikke tilladt at anvende tilbehør og løsninger, der frarådes af fabrikanten.

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med varen skal anmeldes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren el. patienten har sin bopæl.

Følg instruksen: HVORDAN MAN TAGER ORTOSEN PÅ, som medfølger varen.

En oversigt af alle tilgængelige reservedele kan downloades fra hjemmesiden www.reh4mat.com (se den valgte vare).

	CE-mærket bekræfter, at varen lever op til de væsentlige krav
	Fabrikant
	Výrobni data
	Nærværende brugsanvisning skal læses inden varen tages i brug
	BEMÆRK
	Beskyttes mod solen
	Relativ opbevaringsfugtighed
	Opbevaringstemperaturbegrænsning
	Opbevares et tørt sted
	Emballagen kan genbruges
	Medicinsk vare
	Batchnummer
	Katalognummer
	Emballagen skal smides i skraldespanden
	Mærket „Den polske kapital“ understreger varens lokale karakter
	Kemikaliefri vare
	Vare, som anbefales af fagfolk
	Hudvenlig vare
	Innovativ vare
	Minimum udstyr – maksimal effekt
	Økologisk vare
	Allergivenlig
	Holdbar vare
	Vare til redning i nødstilfælde

Tugside on suurepärase tõhusa ravi lahendus vigastuse või teiste seisundite korral. Reh4Mat tooted hindavad ja soovitavad spetsialistid (arstid, füsioterapeudid) ja patsiendid. Meie tooteid toodetakse Poolas ja need on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest. Kõikumuste korral võtke meiega julgelt ühendust: export@reh4mat.com.

NÄIDUSTUS:

Torsotugi tagab stabiilseerimise ning leevendab torso ja lülisamba vaegusi. Tugi tagab rindkere, nimm- ja ristluuosa kompressiooni ja stabiliseerimise. Seda kasutatakse reumaatiliste, neuroloogiliste ja ortopeediliste häirete ja vigastuste korral.

HOOLDUS

- Toode peab olema puhas ja seda peab kasutama vastavalt tootja soovitudele.
Efektiivsuse ja ohutuse tagab ainult toote pakendil ja tootja infomaterjalidel saadaval olev õigesti paigaldatud suurus vastavalt suurus tabelile.
Puhastage toodet süstemaatiliselt, vähemalt üks kord kuus või iga kümne päeva tagant vastavalt tootja soovitudele, tagades toote hoidmise heas korras.
Kui tootel on külgnised lahased või kestad ja neid on võimalik ilma lahti võtta tööriistadeta, eemaldage need enne pesemist.
Peske käsitelid sooja veega ja seebiga temperatuuril 30°C.
Kasutage täiesti kuivana.
Ärge triikige, tõdelge klooriga, ärge puhastage keemiliselt ega trummelkuivata.
Hoidke seda kuivas ja puhtas kohas.
Kaitse seda niiskuse, äärmuslike temperatuuride, päikesevalguse eest, kuivatage eemal soojusallikatest.

VASTUNÄIDUSTUSED

- Toodet tuleb kasutada vastavalt arsti või füsioterapeudi soovitudele.
Ärge kasutage toodet vales suuruses.
Efektiivsuse ja ohutuse tagab ainult toote pakendil ja tootja infomaterjalidel saadaval olev õigesti paigaldatud suurus vastavalt suurus tabelile.
Ärge kasutage toodet vaimse häirega inimestel ja lastel ilma eestkostja kontrollita.
Ärge kasutage toodet pindmist ja sügavate tunnetushäiretega patsientidel ilma eestkostja järelevalveta.
Toote pealekandmise piirkonna nahk peab olema puhas. Kontrollige naha seisundit ja nahakahjustuste tekkimisel on vaja pöörduda arsti poole.
Veenilaiendite, süvaveenitromboosi (DVT), turse korral võib ortooosi kasutada ainult arstiga kokkuleppel.
Ärge kasutage toodet mitte eesmärgipäraselt.
Ärge kasutage toodet kahjustuste või kuju deformatsioonide korral.
Ärge proovige seda toodet ise hoolida. Sõltumatu sekkumine toote disaini võib põhjustada kasutaja püsivat tervisekahjustust.
Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita.
Ärge kasutage toodet lahtise tule ega kuumu pinna lähedal. See võib tõsiselt vigastada kasutajat ja põhjustada tõsist tervisekahjustust.
Õõsel kasutage ortooosi ainult siis, kui arst on selle määranud.

TURVANÕUDED

- Tähelepanu! See juhend sisaldab põhiteavet, mis on vajalik toote õigeks ja ohutuks kasutamiseks, hooliduseks ja puhastamiseks.
Tähelepanu! Enne toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi. Jälgides juhendis sisalduvat juhiseid tagavad toote ohutuse ja efektiivsuse. Kõikumuste korral pöörduge palun oma hoolidustöötaja poole.
Tähelepanu! Tootet mitte kasutamine vastavalt kasutusjuhendile võib põhjustada tõsiselt tüsistusi.
Tähelepanu! Hoidke juhendit alles edaspidiseks kasutuseks.
Tähelepanu! Kontrollige toote seisukorda. Kui toode on kahjustatud, katkestage kasutamine ja pöörduge tootja poole. Ainult kahjustamata toode ja nõutet kohane kasutamine tagab selle õige ja ohutu töö.
Tähelepanu! Tootja vastutab ainult toote varjatud defektide eest või mehaaniliste kahjustuste eest, mis tekkisid loomulikult viisil.
Tähelepanu! Tootja vastutab toote efektiivsuse ja ohutuse eest ainult juhul, kui ostate toote volitatud müüjalt.
Tähelepanu! Valu on alati hoiatuse märk. Kui valu püsib või suureneb, on soovitatav konsulteerida oma arsti või füsioterapeudiga.
Tähelepanu! Kasutamiseks ainult ühel patsiendil.
Tähelepanu! Toodet tuleb kasutada vastavalt arsti või füsioterapeudi soovitudele.
Enne esmakordset kasutamist kontrollige toote suurust. Ainult hea suurus tagab ohutuse ja efektiivsuse. Vale toote suurus vähendab ravi mõju, suurendab kasutaja ebamugavusi ja vale asendit. Tugisideme õige kasutamine vastavalt arsti või füsioterapeudi soovitudele.
Ärge kasutage toodet pindmist ja sügavate tunnetushäiretega patsientidel ilma eestkostja järelevalveta.
Toote pealekandmise piirkonna nahk peab olema puhas. Kontrollige naha seisundit ja nahakahjustuste tekkimisel on vaja pöörduda arsti poole.
Veenilaiendite, süvaveenitromboosi (DVT), turse korral võib ortooosi kasutada ainult arstiga kokkuleppel.
Enne kasutamist eemaldage pakend ja tarvikud, näiteks paberid, kaardid või sildid.
Ärge kasutage toodet mitte eesmärgipäraselt.
Ärge kasutage toodet vales suuruses.
Ärge kasutage toodet vaimse häirega inimestel ja lastel ilma eestkostja kontrollita.
Ärge kasutage toodet kahjustuste või kuju deformatsioonide korral.
Ärge proovige seda toodet ise hoolida.
Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita.

Selle seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleks teavitada nii [tootjat] kui ka oma riigi pädevat asutust.
Palun järgige tootega kaasasolevat seadistuse kirjeldust.
Valitud toote õigsi saadaolevate varuosade loend on saadaval aadressil www.reh4mat.com.

Table with 10 rows: Deklaratsioon, Tootja, Tootmise kuupäev, Palun lugege juhiseid enne kasutamist, Tähelepanu!, Hoida päikesevalguse eest, Suhtelise niiskuse säilitamine, Ladustamistemperatuuri piiramine, Säilitage kuivas kohas, Pakend on taaskasutatav, Meditsiiniseade, Partii number, Kataloogi number, Pakend tuleb visata prügikasti, "Poola pealinna" märk rõhutab toote kohalikkust, Keemivaba toode, Spetsialistide soovitatud toode, Nahasõbralik toode, Uuenduslik toode, Minimaalne seade, maksimaalne efekt, Keskkonnasõbralik toode, Hüpoallergeenne toode, Vastupidav toode, ER toode

Déantar táirgi nuálacha Reh4Mat go cúramach as ábhair ardchaighdeán. Is é sástacht othair áir bpríomhchuspóir. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le do díoltóir nó déan teagmháil le hionadair Reh4Mat go díreach trí riomhphost:export@reh4mat.com.

ÚSÁID BEARITAITHE:

Deartar teanntán cabhlach chun an dromlach agus an chabhail a chobhsú agus lena ndéanamh níos éadroime. Cinntíonn an teanntán comhbhrú agus cobhsú an dromaigh tórasach, lumbaigh agus sacraigh. Úsáidíteir é do neamhoird réamatacha, néareolaíochta agus ortaipéideacha.

COTHABHÁIL AGUS STÓRÁIL

- Ba chóir an táirge seo a choinneáil glan agus a úsáid i gcomhréir chomhairle an déantóra a leagtar amach sa lámhleabhar seo.
Ba chóir an táirge seo a ghlanadh go rialta, uair amháin sa mhí ar a ghanadh nó níos minice más gá, de réir chomhairle an déantóra, a chinntíonn go gcoinnteair an táirge i ndea-chaol.
Má tá cléithíní sa táirge agus is féidir iad a bhaint go héasca, ba cheart iad a bhaint sula nitear é.
Nígh de láimh le huisce bogthe sobalach ag 30°C.
Sruthlaigh go mion, bain úsáid as nuair atá sé tirim.
Ná smúdáil, ná clóirínigh, ná tinimghlan, ná triomaigh i dtriomadóir rothlaim.
Stóráil an táirge in áit ghlan agus thirim.
Cosain é thaisleach, ná fág é gan chosaint ar theocht an ard, triomaigh an táirge ar shiúl ó fhóinsí teochta.

RABHADH:

- Ná húsáid an táirge gan chomhairle do ghairmí cúraim sláinte nó teiripeoir a iarraidh.
Ná húsáid an toise mícheart den táirge. Ní chinntíonn ach an toise ceart, roghnaithe de réir na cairte toise atá ar fáil ar phacáiste an táirge agus i mbileoga eolais an déantóra, éifeachtacht agus sábháilteacht an táirge.
Ná húsáid an táirge ar leanaí, othair le lagú cuimhne, le laghdú meabhrach agus othair a bhfuil meabhairghalar orthu gan mhaoirseacht cúramóra.
Ná húsáid an táirge ar dhaoine le mothú lagaithe gan mhaoirseacht cúramóra.
Ná húsáid an táirge ar chraiceann ar a shalaoigh. Ní mór duit caoi an chraicinn a sheiceáil go córasach agus an táirge a úsáid agat.
Ná húsáid an táirge ar dhaoine le loit chraicinn, neamhoird théachta fola, at agus féitheacha borrrha in áiteanna a dhéanann teagmháil leis an táirge gan chomhairiúchán a fháil leis an lia freagrach nó teiripeoir roimh ré.
Ná húsáid an táirge ach don chuspóir atá beartaithe amháin.
Ná húsáid an táirge má tá sé míchumtha nó damáistithe.
á déan iarracht an táirge a dheisiú tú féin nó ná déan aithruithe ar struchtúr an táirge. D'fhéadfadh go mbeadh dochar buan do shláinte an úsáideora de bharr athrú ar bith ar dhearach an táirge.
Ná húsáid oiriúntí nó réitigh nach bhfuil molta ag an déantóir.
Ná húsáid an táirge garr do lasair nó ar dhromchla te. D'fhéadfadh sé seo an t-úsáideoir a ghortú go dona agus dhéanfadh gortú sláinte trom air dá bharr.
Ní féidir an teanntán a chaitheamh san oíche ach le comhairle ón lia a bhfuiltear faoina chúram amháin.

RIALACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Aire! Tugann an lámhleabhar seo eolas bunúsach atá ag teastáil le haghaidh an úsáid ceart agus sábháilte an táirge, a chothabháil agus a ghlantachán.
Aire! Léigh an lámhleabhar seo sula n-úsáideann tú an táirge. Beidh tú in ann an táirge a úsáid go sábháilte agus a shaoil é leathnú tríd na treoracha sa lámhleabhar seo a leanúint. I gcás amhráis, téigh i gcomhairle do dhochtúra nó teiripeoir.
Aire! D'fhéadfadh go mbeidh aimhréidh throm ar othair de bharr úsáid mhalartach an táirge lena bhfuil luaithe sna treoracha an lámhleabhair seo.
Aire! Coinnigh an lámhleabhar seo in áit a bhfuil rochtain éasca air.
Aire! Roimh gach úsáid, ba cheart an táirge a sheiceáil do dhochair sofhéithe, scoilteanna, uamhanna scollte, míchumas nó lochtanna eile a d'fhéadfadh an t-úsáideoir a chur i gcontúirt le linn a úsáide. Má fhaightear damáiste don tháirge, stop á úsáid agus déan teagmháil leis an déantóir. Ní chinntíonn ach táirge slán agus a úsáid ceart a fheidhmiú cuí.
Aire! Níl an déantóir freagrach ach as lochtanna folaih nó dochar a tharlaionn le linn obráid ceart mar thoradh ar locht déantúsaíochta sa táirge.
Aire! Níl an déantóir faoi dhlihteanas i leith feidhmiú ceart ach nuair a cheannaithear ó dháileoir údaraithe nó siopa speisialaithe.
Aire! Is rabhadh é i gcónaí pian a mhothú. Má leanann an phian air nó má théann sé in oclás, ní mór duit do phríomhlia nó fisiteiripeoir.
Aire! Níor cheart an táirge seo a úsáid ach ar othair amháin.
Aire! Ba cheart an táirge a úsáid de réir chomhairle do dhochtúra nó fisiteiripeoir.
Roimh a úsáid, seiceáil le do thoil go bhfuil toise an táirge i gceart de réir na cairte toise. Ní chinntíonn ach an toise ceart sábháilteacht agus éifeachtacht na cóireála. Laghdaionn toise mícheart éifeachtacht na cóireála, d'fhéadfadh míchomparad a mhothú agus suimh choir mícheart tarlú le linn a úsáid dá bharr. Ba cheart go roghnaionn an lia, miondíoltóir speisialaithe nó fisiteiripeoir atá freagrach ach an othar an gléas.
Ná húsáid an táirge ar leanaí, othair le lagú cuimhne, le laghdú meabhrach agus othair a bhfuil meabhairghalar orthu gan mhaoirseacht cúramóra.
Ba cheart an craiceann sa réigiún atá i dteagmháil leis an táirge a ghlanadh. Ní mór duit caoi an chraicinn a sheiceáil go córasach. I gcás loit chraicinn nó at sna réigiúin i dteagmháil leis an táirge (m.sh. scrabhadh eipideirmeach, cneácha, gríos, eachma, at), déan teagmháil leis an lia atá freagrach le do thoil.
Ná húsáid an táirge ar dhaoine le loit chraicinn, neamhoird théachta fola, at agus féitheacha borrrha in áiteanna a dhéanann teagmháil leis an táirge gan chomhairiúchán a fháil leis an lia freagrach nó teiripeoir roimh ré.
Bain an phacáistíocht ar fad (páipéir, plasteach), lípéid le gearradh agus cilbeanna cairtchláir de roimh a úsáid.
Ná húsáid an táirge ach don chuspóir atá beartaithe amháin.
Ná húsáid an toise mícheart den táirge.
Ná húsáid an táirge ar leanaí, othair le lagú cuimhne, le laghdú meabhrach agus othair a bhfuil meabhairghalar orthu gan mhaoirseacht cúramóra.
Ná húsáid an táirge má tá sé míchumtha nó damáistithe.
Ná déan iarracht an táirge a dheisiú tú féin nó ná déan aithruithe ar struchtúr an táirge.
Ná húsáid oiriúntí nó réitigh nach bhfuil molta ag an déantóir.

Ní mór aon thimpiste throm a bhaineann leis an ngléas a chur in iúl don dhéantóir agus d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-úsáideoir nó an t-othair ina chónaí.
Lean na TREORACHA CAITE a chuirtear san áireamh leis an táirge.
Tá liosta na bpáirteanna breise ar fáil ag: www.reh4mat.com in aice leis an táirge roghnaithe.

Table with 10 rows: Dearbhú chomhréireacht an táirge le riachtanais na rialachán AE, Déantóir, Dáta táirgeachta, Léigh lámhleabhar an úsáideora roimh a úsáid, AIRE, Cosaint ar sholas na gréine, Bogthaise choibhneasta stórála, Teorannacha teochta stórála, Stóráil in áit thirim, Pacáistíocht in-athchúrsáilte, Táirge leighis, Uimhir bhaisce, Uimhir catalóige, Ba cheart go gcaithfeair an pacáiste sa bhosca bruscair, Cuireann an marc "Polish Capital" béim ar nádúr áitiúil an táirge, Táirge saor ó cheimiceán, Táirge molta ag speisialtóirí, Táirge oiriúnach don chraiceann, Táirge nuálach, éifeacht uasta i dtáirge íosta, Táirge éiceolaíoch, Táirge hiopailléirgineach, Táirge seasta, Táirge soláthair tapa leighis

„Reh4Mat“ gaminiai – modernūs ir inovatyvūs gaminiai, kurie itin atidžiai gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų. Mūsų pagrindinis tikslas – pasiekti, kad pacientai būtų patenkinti. Kitus klausimų, prašome kreiptis į pardavėją arba tiesiogiai susisiekti su „Reh4Mat“ darbuotoju e. paštu export@reh4mat.com.

GAMINIO PASKIRTIS

Liemens įtvaro paskirtis – stabilizuoti ir sumažinti liemens ir stuburo apkrovą. Įtvaras suspaudžia ir stabilizuoja stuburo krūtinės, juosmens ir kryžkaulio sritys. Naudojamas reumatiniams, neurologiniams ar ortopediniams negalavimams gydyti.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Gaminį laikyti švarų ir naudoti pagal šioje instrukcijoje pateikiamus gamintojo nurodymus.
- Gaminį valyti sistemingai, bent kartą per mėnesį arba prireikus dažniau pagal gamintojo nurodymus ir užtikrinanti jo tinkamą būklę.
- Jeigu gaminyje yra įtvarų, lukščių ir galima juos lengvai išimti, prieš skalbiant būtina juos išimti.
- Skalbti rankomis drungnu vandeniu su muilu 30 °C temperatūroje.
- Smulkią galvą mion, baim usidais au nair atė sė trim.
- Ritinėlio neskalbti, nelyginti, nechloruoti, neskalbti cheminiu būdu, nedžiiovinti būgningėje džiovyklėje.
- Gaminį laikyti švarioje ir sausoje patalpoje.
- Saugoti nuo drėgmės, kraštutinės temperatūros poveikio, džiovinti atokiau nuo šilumos šaltinių.

SAUGOS SĄLYGOS

- Dėmesio! Šioje instrukcijoje pateikiama pagrindinė informacija, būtina tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti ir valyti gaminį.
- Nenaudoti netinkamo dydžio gaminio.
- Tik tinkamai parinktas dydis pagal dydžių lentelę, skelbiamą ant gaminio pakuotės ir gamintojo informaciniuose leidiniuose, užtikrina veiksmingumą ir saugą.
- Nenaudoti gaminio vaikams, asmenims su atminties sutrikimu, ribota sąmone ir psichikos ligomis, neprižiūrint globėjui.
- Nenaudoti gaminio asmenims su paviršinių ir gilųjų pojųčių sutrikimu, neprižiūrint globėjams.
- Nenaudoti gaminio „jeigu oda nenuvalyta. Būtina sistemingai tikrinti odos būklę, kai naudojamas gaminyje.“
- Nenaudoti gaminio asmenims su odos pokyčiais, kraujo krešėjimo sutrikimais, edemomis ir venų varikoze vietose, kur gaminyje priglundu, prieš tai nepasitarus su gydančiuoju gydytoju ar terapeutu.
- Nenaudoti gaminio ne pagal jo paskirtį.
- Nenaudoti deformuoto ar pažeisto gaminio.
- Nebandyti savo nuožiūra taisyti gaminį ir kaip nors keisti gaminio konstrukciją. Kitišimas į gaminio konstrukciją gali sukelti ilgalaikę žalą naudojotoje sveikatai.
- Nenaudoti gamintojo nerekomenduojamų priedų ir priemonių.
- Nenaudoti gaminio šalia atviroios liepsnos ar karšto paviršiaus. Tai gali rimtai sužeisti naudotoją ir sukelti rimtą žalą sveikatai.
- Įtvarą naktį naudoti tik gydančiojo gydytojo nurodymu.

SAUGOS SĄLYGOS:

- Dėmesio! Šioje instrukcijoje pateikiama pagrindinė informacija, būtina tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti ir valyti gaminį.
- Dėmesio! Prieš pradėdam naudoti gaminį naudotojas privalo susipažinti su šia instrukcija. Šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų laikymasis padeda saugiai naudoti gaminį ir paiginti jo naudojimo trukmę. Kitus abejonių, būtina pasitarti su gydytoju ar fizioterapeutu.
- Dėmesio! Naudojant gaminį ne pagal naudojimo instrukcijos taisykles, gali kilti rimtų komplikacijų.
- Dėmesio! Šia instrukciją laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Dėmesio! Kaskart naudojant gaminį būtina patikrinti, ar nėra matomų pažeidimų, įtrūkimų, prairusių siūlių, deformacijų ar kitų trūkumų, galinčių naudotojui kelti pavojų naudojant. Aptikus gaminio pažeidimų, būtina nustoti jį naudoti ir susisiekti su gamintoju. Tik nepažeistas gaminyje ir tinkamas jo naudojimas užtikrina tinkamas jo funkcijas.
- Dėmesio! Gamintojas atsako tik už paslėptus trūkumus ar tinkamai naudojant atsiradusius pažeidimus dėl gaminio gamybos trūkumų.
- Dėmesio! Gamintojas atsako už tinkamą gaminio veikimą tik tuo atveju, jeigu gaminyje išgytas iš įgaliojotojo platinėjo ar specializuotoje paruoštvėje.
- Dėmesio! Skausmas visada yra įspėjimas. Išliekiant skausmui ar stiprėjant jo simptomams, būtina kreiptis į gydančiąjį gydytoją ar reabilitologą.
- Dėmesio! Gaminį turėtų naudoti tik vienas pacientas.
- Dėmesio! Gaminį naudoti pagal gydytojo ar reabilitologo nurodymus.
- Prieš pirmą kartą naudojant būtina patikrinti, ar gaminio dydis tinkamai parinktas pagal dydžių lentelę. Tik tinkamai parinktas dydis užtikrina terapijos saugą ir veiksmingumą. Netinkamai parinktas dydis mažina terapijos veiksmingumą, gali sukelti diskomfortą ir sukurti netinkamą kūno padėtį naudojant. Gaminį turėtų parinkti specialistas, gydytojas, specializuotas pardavėjas ar reabilitologas.
- Nenaudoti gaminio vaikams, asmenims su atminties sutrikimu, ribota sąmone ir psichikos ligomis, neprižiūrint globėjui.
- The skin in the area where the product is applied should be clean. Control the skin condition and in case of skin lesions occurring, it is necessary to contact a physician.
- Nenaudoti gaminio asmenims su odos pokyčiais, kraujo krešėjimo sutrikimais, edemomis ir venų varikoze vietose, kur gaminyje priglundu, prieš tai nepasitarus su gydančiuoju gydytoju ar terapeutu.
- Prieš pradėdam naudoti būtina nuimti visą pakuotę (popierinę, plastikinę), pjovimo įsiuvus ir kartonines etiketes.
- Nenaudoti gaminio ne pagal jo paskirtį.
- Nenaudoti netinkamo dydžio gaminio.
- Nenaudoti gaminio vaikams, asmenims su atminties sutrikimu, ribota sąmone ir psichikos ligomis, neprižiūrint globėjui.
- Nenaudoti deformuoto ar pažeisto gaminio.
- Nebandyti savo nuožiūra taisyti gaminį ir kaip nors keisti gaminio konstrukciją.
- Nenaudoti gamintojo nerekomenduojamų priedų ir priemonių.

Apie bet kokį rimtą įvykį su gaminiu būtina pranešti gamintojui ir įgaliotai valstybės narės, kurioje yra naudotojo ar paciento gyvenamoji vieta, įstaigai.

Būtina laikytis su gaminiu pateikiamo DĖJIMO BŪDO.

Visų turimų atsarginių dalių sąrašą galima parsisiųsti iš tinklalapio www.reh4mat.com, šalia pasirinkto gaminio.

	Gaminio atitikties pagrindiniams ES teisės aktų reikalavimams įvertinimo patvirtinimas.
	Gamintojas
	Pagamavimo data
	Prieš naudojant susipažinti su naudojimo instrukcija
	DĖMESIO
	Saugoti nuo saulės spindulių
	Laikymo santykinis drėgnis
	Laikymo temperatūros apribojimas
	Laikyti sausoje vietoje
	Pakuotė tinkama perdirbti
	Medicinos priemonė
	Partijos numeris
	Katalogo numeris
	Pakuotę mesti į šiukšliadėžę
	Ženklas „Lenkijos kapitalas“ pabrėžia gaminio lokalumą.
	Gaminys be cheminių medžiagų
	Specialistų rekomenduojamas gaminyje
	Odai nekenksmingas gaminyje
	Inovatyvus gaminyje
	maksimalus rezultatas iš minimalistinio gaminio
	Ekologiškas gaminyje
	Hipoalerginis gaminyje
	Patvarus gaminyje
	Sparčiojo aprūpinimo medicinos priemonėmis gaminyje

De brace is een uitstekende oplossing voor effectieve therapie bij blessures of andere aandoeningen. De producten van Reh4Mat worden vervaardigd en aanbevolen door specialisten (artsen, fysiotherapeuten) en patiënten. Onze producten worden geproduceerd in Polen en gemaakt van hoogwaardige materialen. Neem bij vragen gerust contact met ons op: export@reh4mat.com.

INDICATIE:

De rompondersteuning zorgt voor stabilisatie en ontlasting van romp en wervelkolom. De ondersteuning biedt compressie en stabilisatie van thoracale, lumbale en de sacrale wervelkolom. Het wordt gebruikt in geval van reumatische, neurologische en orthopedische aandoeningen en verwondingen.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Het product moet schoon worden gehouden en naar voorschrift van de fabrikant worden gebruikt
- Aanbevelingen: Maak het product systematisch schoon, minstens één keer per maand of meer indien nodig in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, en zorg ervoor dat het in goede staat blijft.
- Als het product laterale spalken of schelpen bevat en het is mogelijk om ze zonder gereedschap te demonteren, verwijder ze voor het wassen.
- Was met de hand in warm water met zeep op een temperatuur van 30 ° C.
- Gebruik als het helemaal droog is.
- Niet strijken, niet met chloor bewerken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel.
- Bewaar het op een droge- en schone plek.
- Beschermen tegen vocht, extreme temperaturen, direct zonlicht en houdt product uit de buurt van warmtebronnen.

CONTRA-INDICATIES

- Het product moet worden gebruikt volgens de aanbevelingen van een arts of fysiotherapeut.
- Gebruik het product niet in de verkeerde maat.
- Alleen een correct passende maat, in overeenstemming met de maattabel, beschikbaar op de productverpakking en het informatiemateriaal van de fabrikant, garandeert effectiviteit en veiligheid.
- Gebruik het product niet door mensen en kinderen met psychische stoornissen zonder ouder en / of voogd controle.
- Gebruik het product niet bij patiënten met oppervlakkige en diepe gevoelstoornissen zonder toezicht van een ouder en / of voogd.
- De huid in het gebied waar het product wordt aangebracht moet schoon zijn. Controleer de huid conditie en in geval van huidlaesies is het noodzakelijk om contact op te nemen met een arts.
- In het geval van spataderen, diepe veneuze trombose (DVT), oedeem is het gebruik van de brace alleen toegestaan na contact met arts.
- Gebruik het product niet tegen het beoogde doel.
- Gebruik het product niet in geval van beschadiging of vervorming.
- Probeer dit product niet zelf te repareren. Toegebrachte wijzigingen aan het van het product kan leiden tot permanente schade aan de gezondheid van de gebruiker.
- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in de buurt van open vuur of op een heet oppervlak. Dit kan de gebruiker ernstig verwonden en tot ernstige gezondheidschade leiden.
- Gebruik de brace 's nachts alleen als dit is voorgeschreven door uw arts.

VEILIGHEIDSRREGELS

- Aandacht!** Deze handleiding bevat basisinformatie die nodig is voor een correct en veilig gebruik van het product, onderhoud en reiniging.
- Aandacht!** Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Volgens de instructies in de handleiding bieden de veiligheid van het product en effectiviteit. Raadpleeg bij vragen uw zorgverlener.
- Aandacht!** Het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de handleiding kan ernstige gevolgen hebben.
- Aandacht!** Bewaar de handleiding voor de toekomst.
- Aandacht!** Controleer de staat van het product. Stop als het product is beschadigd. Gebruik het product niet en neem contact op met de fabrikant. Alleen een onbeschadigd product en correct gebruik garanderen een juiste en veilige werking.
- Aandacht!** De fabrikant is alleen verantwoordelijk voor verborgen gebreken in het product of mechanische schade is ontstaan op de natuurlijke manier van gebruik.
- Aandacht!** De fabrikant is verantwoordelijk voor de effectiviteit en veiligheid van het product alleen in geval van aankoop van het product bij een geautoriseerde verkoper.
- Aandacht!** Pijn is altijd het teken van waarschuwing. Als de pijn aanhoudt of toeneemt is het raadzaam om uw arts of fysiotherapeut te raadplegen.
- Aandacht!** Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt.
- Aandacht!** Het product moet worden gebruikt volgens de aanbevelingen van een arts of fysiotherapeut.
- Controleer voor het eerste gebruik de maat van het product. Alleen een goede maat garandeert veiligheid en effectiviteit. Een verkeerde maat van het product vermindert het effect van de behandeling. Ongemak en / of een verkeerde positie van de gebreken kan dan toemenen. Correct gebruik van de brace door arts of therapeut.
- Gebruik het product niet door mensen en kinderen met psychische stoornissen zonder ouder en / of voogd controle.
- De huid in het gebied waar het product wordt aangebracht moet schoon zijn. Controleer de conditie van de huid en in geval van huidlaesies is het noodzakelijk om contact op te nemen met een arts.
- In het geval van spataderen, diepe veneuze trombose (DVT), oedeem is het gebruik van de brace alleen toegestaan na contact met arts.
- Verwijder voor gebruik de verpakking en accessoires zoals papieren kaarten en etiketten.
- Gebruik het product niet tegen het beoogde doel.
- Gebruik het product niet in de verkeerde maat.
- Gebruik het product niet door mensen en kinderen met psychische stoornissen zonder ouder en / of voogd controle.
- Gebruik het product niet in geval van beschadiging of vervorming.
- Probeer dit product niet zelf te repareren.
- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

Ernstige incidenten met deze producten moeten zowel aan de fabrikant als de bevoegde autoriteit in uw land gemeld worden.

Volg de INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN die bij het product is geleverd.

Een lijst met alle beschikbare reserveonderdelen is beschikbaar op www.reh4mat.com voor het geselecteerde product.

	Verklaring dat het product voldoet aan de gestelde eisen.
	Fabrikant
	Productie datum
	Lees voor gebruik de instructies in de handleiding.
	Aandacht!
	Tegen zonlicht beschermen.
	Relativ opbevaringsfugtighed
	Opbevaringstemperaturbegrænsning
	Opbevares et tørt sted
	Emballagen kan genbruges
	Medicinsk vare
	Batchnummer
	Katalognummer
	Emballagen skal smides i skraldespanden
	Mærket „Den polske kapital“ understreger varens lokale karakter
	Kemikaliefri vare
	Vare, som anbefales af fagfolk
	Hudvenlig vare
	Innovativ vare
	Minimum udstyr – maksimal effekt
	Økologisk vare
	Allergivenlig
	Holdbar vare
	Vare til redning i nødstilfælde

Ortéz je vynikajúcim riešením pre efektívnu terapiu v prípade úrazu alebo iných stavov. Výrobky Reh4Mat oceňujú a odporúčajú špecialisti (lekári, fyzioterapeuti) aj pacienti. Naše výrobky sa vyrábajú v Poľsku a sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: export@reh4mat.com.

INDIKÁCIA

Podpora trupu zagotavljva stabilizacijo in razbremenitev trupa in hrbtenice. Podpora zagotavlja stiskanje in stabilizacijo prsne, ledvene in krížne hrbtenice. Uporablja se v primer revmatikih, nevroloških in ortopedskih motenj in poškodb.

STAROSTLIVOST A ÚDRŽBA

- Výrobok musí byť udržiavaný v čistej a musí byť používaný podľa pokynov a odporúčaní výrobcu.
- Produkt čistíte systematicky, v prípade potreby najmenej raz za mesiac alebo častejšie, v súlade s odporúčaniami výrobcu, aby bol udržiavaný v dobrom stave.
- Ak má výrobok bočné dlahy alebo výstupy a je možné ich demontovať bez použitia náradia, pred umývaním ich vyberte.
- Umyte si ruky v teplej vode s mydlom pri teplote 30 ° C.
- Použite, keď je úplne suchý.
- Nežehlí, nechlóruje, chemicky nečistí, nesuší v sušičke.
- Udržujte ho v suchej a čistej zóne.
- Chráňte pred vlhkosťou, extrémnymi teplotami, slnečným žiarením a suchom a mimo zdrojov tepla.

KONTRAINDIKÁCIE

- Produkt by sa mal používať podľa odporúčaní lekára alebo fyzioterapeuta.
- Nepoužívajte výrobok v nesprávnej veľkosti.
- Účinnosť a bezpečnosť zaručuje iba správne zvolený rozmer v súlade s tabuľkou veľkostí, ktorá je uvedená na obale výrobku a v informačných materiáloch výrobcu.
- Nepoužívajte výrobok ľuďmi a deťmi s duševnými poruchami bez dozoru zákonného zástupcu
- Nepoužívajte výrobok u pacientov s poruchami povrchového a hĺbového vnímania bez dozoru zákonného zástupcu.
- Pokožka v mieste nanesenia produktu by mala byť čistá. Kontrolujte stav pokožky a v prípade výskytu kožných lézií je potrebné kontaktovať lekára.
- V prípade kŕčových žíl, hlbokej žilovej trombozy (DVT), opuchov, používanie ortézy je povolené iba po kontakte s lekárom.
- Nepoužívajte výrobok v rozpore s účelom jeho použitia.
- Nepoužívajte výrobok v prípade poškodenia alebo deformácie tvaru.
- Nepokúšajte sa sami opravovať tento výrobok. Neodborné zasahovanie do dizajnu produktu môže mať za následok trvalé poškodenie zdravia používateľa.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti otvoreného ohňa, alebo na horúcom povrchu. Môže to vážne zraniť používateľa a viesť k vážnemu poškodeniu zdravia.
- Ortézu používajte počas noci, iba ak to predpísal lekár.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ SAFETY RULES

- **TPozor!** Táto príručka obsahuje základné informácie potrebné na správne a bezpečné používanie výrobku, údržbu a čistenie.
- **Pozor!** Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod. Dodržiavanie pokynov v tejto príručke poskytuje bezpečnosť produktu a účinnosť. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára.
- **Pozor!** Použitie produktu v rozpore s návodom na obsluhu môže spôsobiť vážne škody a komplikácie.
- **Pozor!** Návod si uschovajte pre budúcnosť.
- **Pozor!** Skontrolujte stav produktu. Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať a obráťte sa na výrobcu. Iba nepoškodený výrobok a správne použitie zaručuje jeho správnu a bezpečnú účinnosť.
- **Pozor!** Výrobca zodpovedá iba za skryté vady výrobku, resp. za mechanické poškodenia, ku ktorým došlo prirodzeným spôsobom používania.
- **Pozor!** Za účinnosť a bezpečnosť produktu zodpovedá výrobca iba v prípade zakúpenia produktu u autorizovaného predajcu.
- **Pozor!** Bolesť je vždy znakom varovania. Ak bolesť pretrváva, alebo sa zvyšuje, je vhodné poradiť sa so svojim lekárom alebo fyzioterapeutom.
- **Pozor!** Len na použitie pre jedného pacienta.
- **Pozor!** Produkt by sa mal používať iba podľa odporúčaní lekára, alebo fyzioterapeuta.
- Pred prvým použitím skontrolujte veľkosť produktu. Iba dobrá veľkosť zaručuje bezpečnosť a efektívnosť. Nesprávna veľkosť produktu znižuje účinok liečby, zvyšuje sa nepohodlie a nesprávna poloha používateľa. Určenie správnej diagnózy prenehajte na svojho lekára, alebo fyzioterapeuta.
- Nepoužívajte výrobok ľuďmi a deťmi s duševnými poruchami bez dozoru zákonného zástupcu.
- Pokožka v mieste nanesenia produktu by mala byť čistá. Kontrolujte stav pokožky a v prípade výskytu kožných lézií je potrebné kontaktovať lekára.
- V prípade kŕčových žíl, hlbokej žilovej trombozy (DVT), opuchov, používanie ortézy je povolené iba po kontakte s lekárom.
- Pred použitím odstráňte obal a príslušenstvo, ako sú papiere, kartičky alebo štítky.
- Nepoužívajte výrobok v rozpore s účelom jeho použitia.
- Nepoužívajte výrobok v nesprávnej veľkosti.
- Nepoužívajte výrobok ľuďmi a deťmi s duševnými poruchami bez dozoru zákonného zástupcu.
- Nepoužívajte výrobok v prípade poškodenia alebo deformácie tvaru.
- Nepokúšajte sa sami opravovať tento výrobok.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.

Vážne udalosti týkajúce sa tohto zariadenia by mali byť hlásené [výrobcom] a tiež príslušnému orgánu vo vašej krajine.

Postupujte podľa INŠTRUKCÍ, ktoré sú súčasťou produktu.

Zoznam všetkých dostupných náhradných dielov k Vami vybranému produktu je k dispozícii na adrese www.reh4mat.com.

	Vyhľadanie, že výrobok spĺňa základné požiadavky
	Výrobca
	Dátum výroby
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Pozor!
	Chráňte pred slnečným žiarením
	Skladovanie v relatívnej vlhkosti
	Obmedzenie skladovacej teploty
	Skladujte na suchom mieste
	Obal je recyklovateľný
	Zdravotnícka pomôcka
	číslo šarže
	Katalógové číslo
	Obal z výrobku je možné vhodit' do koša
	Značka „Polish Capital“ označuje krajinu výrobcu produktu.
	Produkt bez obsahu chemikálií
	Produkt odporúčaný špecialistami
	Produkt neodráža pokožku
	Inovatívny produkt
	Minimálne zariadenie, maximálny účinok
	Ekologický výrobok
	Hypoalergénny výrobok
	Odolný výrobok
	Produkt ER

Opornica je odlična rešitev za učinkovito terapijo v primeru poškodb ali drugih stanj. Izdelke Reh4Mat cenijo in priporočajo strokovnjaki (zdravniki, fizioterapevti) in bolniki. Naši izdelki so proizvedeni na Poljskem in izdelani iz visoko kakovosti kakovostni material. V primeru kakršnih koli vprašanj nas prosim kontaktirajte: export@reh4mat.com.

INDIKACIJA

Podpora trupu poskytuje stabilizáciu a odľahčenie trupu a chrbtice. Podpora poskytuje kompresiu a stabilizáciu hrudnej, bedrovej a krížovej chrbtice. Používa sa v v prípade reumatických, neurologických a ortopedických porúch a chránici.

SKRB IN VZDRŽEVANJE

- Izdelek mora biti čist in ga uporabljati v skladu s priporočili proizvajalca.
- Izdelek čistite sistematično, vsaj enkrat mesečno ali po potrebi. V skladu s priporočili proizvajalca in zagotovite, da je v dobrem stanju.
- Če izdelek vsebuje stranske opore ali dodatke, ki jih je mogoče razstaviti brez orodja, odstranite le pred pranjem.
- Ročno pranje v topli vodi s milom pri temperaturi 30 ° C.
- Uporabite, ko je popolnoma suh.
- Ne likajte, ne klorirajte, ne sušite kemično, ne sušite v sušilnem stroju.
- Hranite v suhem in čistem prostoru.
- Zaščitite pred vlago, ekstremnimi temperaturami, sončno svetlobo, sušite stran od virov toplote.

KONTRAINDIKACIJE

- Izdelek je treba uporabljati v skladu s priporočili zdravnika ali fizioterapevta.
- Izdelka ne uporabljajte v napačni velikosti.
- Le ustrezna velikost izbrana v skladu s tabelo velikosti, ki je na voljo na embalaži izdelka in proizvajalčevih informativnih gradivih, zagotavlja učinkovitost in varnost.
- Izdelka naj ne uporabljajo ljudje in otroci z duševnimi motnjami brez nadzora skrbnika.
- Izdelka ne uporabljajte pri bolnikih s površinskimi in globokimi motnjami brez nadzora skrbnika.
- Koža na območju nanosa izdelka mora biti čista. Nadzirajte kožo da ne pride do kožnih lezij, če, se je potrebno obrniti na zdravnika.
- V primeru kŕčnih žil, globoke venske tromboze (DVT), edema z uporabo ortoze je dovoljeno le po posvetu z zdravnikom.
- Izdelka ne uporabljajte v nasprotju z namenom uporabe.
- Izdelka ne uporabljajte v primeru poškodb ali deformacije oblike.
- Izdelka ne poskušajte servisirati sami. Neodvisno vmešavanje v zasnovo izdelka lahko povzroči trajno škodo za zdravje uporabnika.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali na vroči površini. To lahko uporabnika resno poškoduje in povzroči resno škodo za zdravje.
- Ortozo ponoči uporabljajte le, če vam je tako predpisal zdravnik.

VARNOSTNA PRAVILA

- **Pozor!** Ta priročnik vsebuje osnovne informacije, potrebne za pravilno in varno uporabo izdelka, vzdrževanje in čiščenje.
- **Pozor!** Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik. Po Navodila v priročniku bodo zagotovila varnost izdelka in učinkovitost. Če imate kakršna koli vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- **Pozor!** Uporaba izdelka, ki ni v skladu z navodili, lahko povzroči resne posledice zapletov.
- **Pozor!** Prosimo, hranite priročnik za prihodnost
- **Pozor!** Preverite stanje izdelka. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabite in se obrnite na proizvajalca. Samo nepoškodovan izdelek in pravilna uporaba zagotavljajo njegovo pravilno in varno uporabo.
- **Pozor!** Proizvajalec je odgovoren samo za skrite napake na izdelku oz mehanske poškodbe ki so nastale pri naravnem načinu uporabe.
- **Pozor!** Proizvajalec je odgovoren za učinkovitost in varnost izdelka samo v primeru nakupa izdelka pri pooblaščenem prodajalcu.
- **Pozor!** Bolečina je vedno znak opozorila. Če bolečina ostane ali se poveča, je priporočljivo, da se posvetujete s svojim zdravnikom ali fizioterapevtom.
- **Pozor!** Uporaba samo za enega bolnika.
- **Pozor!** Izdelek je treba uporabljati v skladu s priporočili zdravnika ali fizioterapevta.
- Pred prvo uporabo preverite velikost izdelka. Le dobra velikost zagotavlja varnost in učinkovitost. Napačna velikost izdelka zmanjša učinek zdravljenja, poveča nelagodje in napačen položaj uporabnika. Pravilna uporaba pripomočka naj bo priporočena s strani zdravnika ali zdravnika terapevta.
- Izdelka naj ne uporabljajo ljudje in otroci z duševnimi motnjami brez nadzora skrbnika.
- Koža na območju nanosa izdelka mora biti čista. Nadzirajte kožo da ne pride do kožnih lezij, če, se je potrebno obrniti na zdravnika.
- V primeru kŕčnih žil, globoke venske tromboze (DVT), edema z uporabo ortoze je dovoljeno le po posvetu z zdravnikom.
- Pred uporabo odstranite embalažo in dodatke, kot so papirji, kartice ali nalepke.
- Izdelka ne uporabljajte v nasprotju z namenom uporabe.
- Izdelka ne uporabljajte v napačni velikosti.
- Izdelka ne uporabljajte pri bolnikih s površinskimi in globokimi motnjami brez nadzora skrbnika.
- Izdelka ne uporabljajte v primeru poškodb ali deformacije oblike.
- Izdelka ne poskušajte servisirati sami.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.

V primeru resnih zapletov, ki vključujejo ta izdelek, je treba sporočiti [proizvajalcu] in pristojnemu organu v vaši državi.

Upošteвайте navodila za PRAVILNO NASTAVITEV, ki je priložena izdelku.

Seznam vseh razpoložljivih nadomestnih delov je na voljo na spletnem mestu www.reh4mat.com za izbrani izdelek.

	Izjava, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve
	Proizvajalec
	Datum izdelave
	Pred uporabo preberite navodila za uporabo
	Pozor!
	Zaščitite pred sončno svetlobo
	Shranjevanje relativne vlažnosti
	Omejitev temperature skladiščenja
	Shranjujte v suhem prostoru
	Embalažo je mogoče reciklirati
	Medicinski pripomoček
	Številka serije
	Kataloška številka
	Embalažo je treba vreči v smeti
	Znak "Polish Capital" poudarja izvor izdelka.
	Izdelek brez kemikalij
	Izdelek priporočajo strokovnjaki
	Koži prijazen izdelek
	Inovativen izdelek
	Minimalna naprava, maksimalni učinek
	Okolju prijazen izdelek
	Hipoalergeni izdelek
	Trajen izdelek
	ER izdelek

Reh4Mats produkter är moderna och innovativa, de tillverkas med hög noggrannhet av högkvalitativa material. Vår huvudmål är att tillfredsställa våra patienter. Om du har frågor kontakta din försäljare eller Reh4Mats personell direkt via e-post: export@reh4mat.com.

PRODUKTENS AVSEDDA ANVÄNDNING:

Ryggstödet ska stabilisera och avlasta bälen och ryggraden. Det ska ge kompression och stabilisera bröst-, länd- och korsryggen. Används för reumatiska, neurologiska eller ortopediska sjukdomar.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Produkten ska hållas ren och användas enligt tillverkarens anvisningar som anges i denna bruksanvisning.
- Rengör produkten regelbundet, minst en gång i månaden eller oftare vid behov, enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa dess bra skick.
- Om produkten har skenor (skensystem) som kan demonteras låt demontera dem före tvätt.
- Tvättas för hand i ljummet tvålatten i en temperatur på 30 °C.
- Använd överdraget när det har torkat helt.
- Stryk inte, använd inte klor, kemtvätta inte, torktumla inte.
- Produkten ska förvaras på en ren och torr plats.
- Skydda mot fukt, utsätt inte för extrema temperaturer, torka bort från värmekällor.

KONTRAIKATIONER

- Använd inte produkten utan att rådfråga din läkare eller terapeut.
- Använd inte produkten i fel storlek. Effektivitet och säkerhet kan endast garanteras om storleken har valts korrekt enligt storlekstabellen som finns på produktens förpackning och tillverkarens informationsmaterial.
- Produkten ska inte användas av barn, personer med minnesstörningar, begränsad medvetenhet och psykiska problem utan vårdarens tillsyn.
- Produkten ska inte användas av personer med känselstörningar och nedsatt proprioception utan vårdarens tillsyn.
- Använd inte produkten på huden som inte har rengjorts. Det är nödvändigt att kontrollera hudens skick regelbundet under användning av produkten.
- Produkten ska inte användas av personer med hudskador, problem med blodkoagulationen, ödem och åderbräck på den plats där produkten ska sitta utan att först rådfråga sin läkare eller terapeut.
- Använd inte produkten för andra ändamål än de avsedda.
- Använd inte produkten om den är deformationerad eller skadad.
- Försök varken reparera produkten själv eller ändra dess konstruktion på egen hand. Ett självständigt ingrepp i produktens konstruktion kan leda till en permanent skada på användarens hälsa.
- Använd endast de tillbehör eller lösningar som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte produkten i närheten av öppen låga eller en het yta. Det kan leda till användarens skadas allvarligt och till en allvarlig hälsoskada.
- Du kan ta på ortosen endast om din läkare har rekommenderat detta.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Obs! Denna bruksanvisning innehåller grundläggande information som är nödvändig för att använda, underhålla och rengöra produkten på ett lämpligt och säkert sätt.
- Obs! Läs denna bruksanvisning innan du börjar använda produkten. Om du följer anvisningarna i denna bruksanvisning kan du använda produkten på ett säkert sätt och förlänga dess livslängd. Om du är tveksam rådfråga din läkare eller fysioterapeut.
- Obs! Om produkten används i strid med anvisningarna i bruksanvisningen finns det risk för allvarliga komplikationer.
- Obs! Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats.
- Obs! Före varje användning kontrollera produkten för synliga skador, sprickor, lösa sömmar, deformationer eller andra fel som kan utgöra en risk för användaren under användning. Om en skada på produkten konstateras sluta använda den och kontakta tillverkaren. Produktens korrekta funktion garanteras endast om den inte är skadad och används på avsett sätt.
- Obs! Tillverkaren är endast ansvarig för dolda fel eller skador som uppstod även om produkten användes på avsett sätt till följd av ett tillverkningsfel.
- Obs! Tillverkaren är ansvarig för produktens korrekta funktion endast om den har köpts från en auktoriserad återförsäljare eller en speciell butik.
- Obs! Smärta är alltid en varning. Om smärta håller i sig eller blir större är det nödvändigt att kontakta sin läkare eller sjukgymnast.
- Obs! Produkten ska endast användas av en patient.
- Obs! Produkten ska användas enligt läkarens eller sjukgymnastens anvisningar.
- Före första användning kontrollera att produktens storlek är korrekt vald, enligt storlekstabellen. Behandlingens effektivitet och säkerhet kan endast garanteras om storleken har valts korrekt. Om storleken har valts fel blir behandlingen mindre effektiv, kan det leda till obehag och fel kroppsställning under användning. Produkten ska väljas av din läkare, en professionell återförsäljare eller sjukgymnast.
- Produkten ska inte användas av personer med känselstörningar och nedsatt proprioception utan vårdarens tillsyn.
- Använd inte produkten på huden som inte har rengjorts. Det är nödvändigt att kontrollera hudens skick regelbundet under användning av produkten.
- Produkten ska inte användas av personer med hudskador, problem med blodkoagulationen, ödem och åderbräck på den plats där produkten ska sitta utan att först rådfråga sin läkare eller terapeut.
- Före användning ta bort allt förpackningsmaterial (i papper och plast), lappar som ska klippas bort och kartongetiketter.
- Använd inte produkten för andra ändamål än de avsedda.
- Använd inte produkten i fel storlek.
- Produkten ska inte användas av barn, personer med minnesstörningar, begränsad medvetenhet och psykiska problem utan vårdarens tillsyn.
- Använd inte produkten om den är deformationerad eller skadad.
- Försök varken reparera produkten själv eller ändra dess konstruktion på egen hand.
- Använd endast de tillbehör eller lösningar som rekommenderas av tillverkaren

Varje allvarliga tillbud med produkten ska anmälas till tillverkaren och en lämplig myndighet i den medlemsstat, där användaren eller patienten har sin hemvist.

TA PÅ PRODUKTEN enligt de medföljande anvisningarna.

En fullständig reservdelsförteckning kan laddas ner från webbplatsen www.reh4mat.com, vid den aktuella produkten.



Intyg om bedömning av överensstämmelse med EU:s väsentliga krav



Tillverkare



Produktionsdatum



Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten



OBS



Skydda mot solljus



Relativ luftfuktighet för förvaring



Begränsning av förvaringstemperatur



Förvaras torrt



Förpackningen är återvinningsbar



Medicinteknisk produkt



Partinummer



Katalognummer



Förpackningen ska slängas i en vanlig soptunna



Symbolen "Polski Kapital" [Polens kapital] betyder att det är en lokal produkt.



Fri från kemikalier



Rekommenderas av specialister



Hudvänlig



Innovativ produkt



Maximal effekt i minimumprodukt



Miljövänlig produkt



Allergivänlig produkt



Hållbar produkt



Snabb medicinsk försörjning

A Reh4Mat termékek modernék és innovatívak, nagy gondossággal, a legjobb minőségű anyagokból készülnek. Legfontosabb célunk a páciensek elégedettségének elérése. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon közvetlenül az eladóhoz vagy a Reh4Mat alkalmalmaztojához e-mailben: export@reh4mat.com.

A TERMÉK RENDELTETÉSE

A törzsmerevitől úgy tervezték, hogy stabilizálja és tehermentesítse a törzset és a gerincet. A merevítő a mellkasi, ágyéki és keresztcsonti gerinc kompresszióját és stabilizálását biztosítja. Reumatikus, neurológiai és ortopédiai alapon fellépő rendelkezésségek esetén alkalmazzák.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A terméket tisztán kell tartani és a gyártó e kézikönyvben található ajánlásainak megfelelően kell használni.
- A termék tisztítását rendszeresen, legalább havonta egyszer, vagy szükség esetén gyakrabban kell elvégezni a gyártó ajánlásainak megfelelően, biztosítva a termék megfelelő állapotban tartását.
- Ročno pranje v topli vodi z milom pri temperaturi 30 °C.
- Csak a takaró teljes száradása után használható.
- Ne likajte, ne klorirajte, ne sušite kemično, ne sušite v sušilnem stroju.
- Tárolja a terméket tiszta és száraz helyiségben.
- Védje a nedvességtől, ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, hőforrástól távol szárítsa.

ELLENJAVALLATOK

- Ne használja a terméket anélkül, hogy konzultálna kezelőorvosával vagy terapeutájával.
- Ne használjon nem megfelelő méretű terméket. Csak a termék csomagolásán és a gyártó tájékoztató anyagában található mérettablázat szerint megfelelően kiválasztott méret garantálja a hatékonyságot és a biztonságot.
- Ne használja a terméket gyermekek, memóriazavarban szenvedő személyek, csökkent tudatállapotú személyek és mentálisan beteg személyek esetében gondviselő felügyelete nélkül.
- Ne használja a terméket olyan személyeken, akiknek károsodott a felszíni vagy mélyszinthes rendszer, gondozó felügyelete nélkül.
- Ne alakmazza a terméket szennyezett bőrön. A termék használata során rendszeresen ellenőrizni kell a bőr állapotát.
- Ne használja a terméket bőrelváltozásokkal, vérrelvadási zavarokkal, duzzanattal és visszérrel küzdő személyeknél a tapadás területén a kezelőorvossal vagy terapeutával való előzetes konzultáció nélkül.
- Ne használja a terméket a rendeltetészerű használatától eltérő módon.
- Ne használja a terméket, ha az deformálódott vagy sérült.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket, és ne végezzen semmilyen változtatást a termék kialakításán. A termék konstrukciójába való önálló beavatkozás maradóan egészségkárosodást okozhat a felhasználónak.
- Ne használjon nem a gyártó által ajánlott tartozékokat vagy megoldásokat.
- Ne használja a terméket nyílt láng közelében vagy forró felületen. Ez súlyosan megsebesítheti a felhasználót, és súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.
- Ortozo ponoci uporabljajte le, če vam je tako predpisal zdravnik.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- Figyelem! Jelen utasítás a termék helyes és biztonságos használatához, karbantartásához és tisztításához szükséges alapvető információkat tartalmazza.
- Figyelem! A termék használata előtt a felhasználó köteles jelen utasítást megismerni. A jelen utasításban található útmutatások betartása lehetővé teszi a termék biztonságos használatát és élettartamának meghosszabbítását. Ha kétségei vannak, forduljon orvosához vagy gyógytornászhoz.
- Figyelem! Ne használja a terméket gyermekek, memóriazavarban szenvedő személyek, csökkent tudatállapotú személyek és mentálisan beteg személyek esetében gondviselő felügyelete nélkül.
- Figyelem! Ezt az utasítást tárolja könnyen hozzáférhető helyen.
- Figyelem! Minden használat előtt ellenőrizni kell a terméket a látható sérülések, repedések, laza varratok, deformációk vagy egyéb olyan hibák tekintetében, amelyek használat közben veszélyeztethetik a felhasználót. Ha a termék sérültnek bizonyul, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a gyártóval. Csak a sérülésmentes termék és annak helyes használata garantálja a megfelelő működést.
- Figyelem! A gyártó csak a termék gyártási hibájából eredő rejtett hibáért vagy a rendeltetészerű működés közben bekövetkező sérülésekért vállal felelősséget. Figyelem! A gyártó csak akkor vállal felelősséget a termék megfelelő működéséért, ha azt hivatalos forgalmazótól vagy szaküzletitől vásárolta.
- Figyelem! A fájdalom mindig figyelmeztetés. Ha a fájdalom továbbra is fennáll vagy súlyosodik, feltétlenül keresse fel háziorvosát vagy gyógytornászát.
- Figyelem! A terméket csak egy páciens használhatja.
- Figyelem! A terméket a kezelőorvos, vagy rehabilitációvezető utasításai szerint használja!
- Első használatba vétel előtt győződjön meg, hogy a méretválasztás megfelelő-e, a mellékelt mérettablázat alapján. Csak a megfelelően megválasztott méret garantálja a terápia biztonságosságát és hatékonyságát. A helytelenül megválasztott méret csökkenti a terápia hatását, diszkomfort érzést okozhat és használat közben rossz testtartást okozhat. A kiválasztást a kezelőorvos, szakieladó, vagy a rehabilitáció-vezető kell, hogy végezze.
- Ne használja a terméket gyermekek, memóriazavarban szenvedő személyek, csökkent tudatállapotú személyek és mentálisan beteg személyek esetében gondviselő felügyelete nélkül.
- Ne alakmazza a terméket szennyezett bőrön. A termék használata során rendszeresen ellenőrizni kell a bőr állapotát.
- Ne használja a terméket bőrelváltozásokkal, vérrelvadási zavarokkal, duzzanattal és visszérrel küzdő személyeknél a tapadás területén a kezelőorvossal vagy terapeutával való előzetes konzultáció nélkül.
- Ne használja a terméket, ha az deformálódott vagy sérült.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket, és ne végezzen semmilyen változtatást a termék kialakításán
- Ne használjon nem a gyártó által ajánlott tartozékokat vagy megoldásokat.

Minden, a termékkel kapcsolatos komoly incidenst jelenteni kell a Gyártónak és azon tagország illetékes szervének, amelyben a termék felhasználója lakik.

Követni kell a termékhez csatolt FELHELYEZÉSI MÓD-ot.

Valamennyi hozzáférhető alkatrész és kiegészítő megtalálható a www.reh4mat.pl oldalon a kiválasztott termék mellett.



Igazolás arról, hogy a termék megfelel az EU-s rendeletek alapvető követelményeinek.



Gyártó



Gyártási dátum



Használat előtt ismerkedjen meg a kezelési utasítással



Figyelem



Óvja a napsugárzástól



Relatív páratartalom tároláskor



Tárolási hőmérséklet korlátozás



Száras helyen tárolni



A csomagolás újrahasznosítható



Egészségügyi termék



Tételszám



Katalogusszám



A csomagolást dobja a szemetesbe



A „Polski Kapital” jelzés a termék származását igazolja



A termék vegyszermentes



A termék szakértők által ajánlott



A termék bőrbarát



Innovatív termék



maximális hatás minimális termékkel



Környezetbarát termék



Hipoallergén termék



Tartós termék



Gyors orvosi ellátás terméke

I prodotti innovativi Reh4Mat sono realizzati con la massima cura con materiali di altissima qualità. Il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del paziente. In caso di domande, contattate il venditore oppure direttamente un rappresentante di Reh4Mat all'indirizzo e-mail: export@reh4mat.com.

USO PREVISTO

Un supporto per torso ha lo scopo di stabilizzare e alleggerire il carico sul torso e sulla colonna vertebrale. Il tutore assicura la compressione e la stabilizzazione della fascia toracica, lombare e sacrale. È usato nei disturbi reumatici, neurologici e ortopedici.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Il prodotto deve essere mantenuto pulito e utilizzato secondo le raccomandazioni del produttore specificate nel presente manuale.
- Deve essere pulito regolarmente, almeno una volta al mese o più spesso se necessario, secondo le raccomandazioni del produttore, che assicurano il mantenimento del prodotto in buone condizioni.
- Se sono presenti stecche nel prodotto ed è possibile rimuoverle facilmente, devono essere rimosse prima del lavaggio.
- Lavare a mano in acqua tiepida e sapone a 30 °C.
- Utilizzare dopo l'asciugatura completa della copertura.
- Non tirare, non clorare, non lavare a secco, non asciugare con l'asciugatrice.
- Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto.
- Proteggere dall'umidità, non esporre a temperature estreme, asciugare il prodotto lontano da fonti di calore.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare il prodotto senza consultare il proprio medico o terapeuta.
- Non utilizzare la misura sballata del prodotto.
- Solo la taglia corretta, selezionata secondo la tabella delle taglie disponibile sulla confezione del prodotto e negli opuscoli informativi del produttore, garantisce l'efficacia e la sicurezza del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con bambini, pazienti con problemi di memoria, con coscienza ridotta e malati mentali senza la supervisione di un accompagnatore.
- Non utilizzare il prodotto con persone con sensibilità superficiale o profonda compromessa senza la supervisione di un accompagnatore.
- Non utilizzare il prodotto sulla pelle sporca. È necessario controllare sistematicamente le condizioni della pelle mentre si usa il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con persone con lesioni cutanee, disturbi della coagulazione del sangue, gonfiore e vene varicose nelle zone di contatto con il prodotto senza aver prima consultato il medico curante o il terapeuta.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non utilizzare il prodotto se è deformato o danneggiato.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli o di apportare modifiche alla struttura del prodotto. Qualsiasi interferenza con il design del prodotto può causare danni permanenti alla salute dell'utente.
- Non utilizzare accessori o soluzioni non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o su una superficie calda. In caso contrario, l'utente può riportare lesioni gravi e possono risultare gravi danni alla salute. Il tutore può essere indossato di notte solo se raccomandato dal medico curante.

REGOLE DI SICUREZZA

- Attenzione! Il presente manuale fornisce le informazioni di base necessarie per l'uso corretto e sicuro del prodotto, la manutenzione e la pulizia.**
- Attenzione! Leggere il presente manuale prima di usare il prodotto.** Seguendo le istruzioni del manuale, sarà possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro e prolungare il suo ciclo di vita. In caso di dubbi, consultare il medico o il fisioterapista.
- Attenzione! L'uso del prodotto in contrasto con le istruzioni incluse nel presente manuale può provocare gravi complicazioni.**
- Attenzione! Conservare il manuale in un luogo accessibile.**
- Attenzione! Prima di ogni utilizzo, il prodotto deve essere controllato per danni visibili, crepe, cuciture allentate, deformazioni o altri difetti che potrebbero mettere in pericolo l'utente durante l'uso. Se il prodotto viene trovato danneggiato, interrompere l'utilizzo e contattare il produttore. Solo un prodotto non danneggiato e il suo uso corretto garantiscono il corretto funzionamento.**
- Attenzione! Il produttore è responsabile solo dei difetti latentii o dei danni che si verificano durante il funzionamento corretto a causa di un difetto di fabbricazione del prodotto.**
- Attenzione! Il produttore è responsabile del corretto funzionamento del prodotto solo se questo viene acquistato da un distributore autorizzato o da un negozio specializzato.**
- Attenzione! Il dolore è sempre un segnale d'allarme. Se il dolore persiste o peggiora, consultare il medico di base o il fisioterapista.**
- Attenzione! Il prodotto deve essere usato da un solo paziente.**
- Attenzione! Il prodotto deve essere usato come raccomandato dal medico o dal fisioterapista.**
- Prima del primo utilizzo, controllare che la misura del prodotto sia corretta secondo la tabella delle taglie. Solo la misura corretta garantisce la sicurezza e l'efficacia del trattamento. Una taglia errata riduce l'efficacia del trattamento, può causare disagio e portare a una cattiva posizione del corpo durante l'uso. Il dispositivo deve essere scelto dal medico curante, da un rivenditore specializzato o da un fisioterapista.
- Non utilizzare il prodotto con bambini, pazienti con problemi di memoria, con coscienza ridotta e malati mentali senza la supervisione di un accompagnatore.
- Non utilizzare il prodotto sulla pelle sporca. È necessario controllare sistematicamente le condizioni della pelle mentre si usa il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con persone con lesioni cutanee, disturbi della coagulazione del sangue, gonfiore e vene varicose nelle zone di contatto con il prodotto senza aver prima consultato il medico curante o il terapeuta.
- Rimuovere tutti gli imballaggi (carta, plastica), le etichette da tagliare e quelle di cartone prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non utilizzare la misura sballata del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con persone con sensibilità superficiale o profonda compromessa senza la supervisione di un accompagnatore.
- Non utilizzare il prodotto se è deformato o danneggiato.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli o di apportare modifiche alla struttura del prodotto.
- Non utilizzare accessori o soluzioni non consigliati dal produttore.

Qualsiasi incidente grave relativo al dispositivo deve essere comunicato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente o il paziente.

Seguire le ISTRUZIONI PER L'INDOSSAMENTO incluse nel prodotto.

Un elenco di tutte le parti di ricambio disponibili è disponibile su www.reh4mat.com accanto al prodotto selezionato.



Attestazione di conformità del prodotto con i requisiti essenziali dei regolamenti UE

Produttore

Data di produzione

Leggere il manuale utente prima dell'uso.

ATTENZIONE

Proteggere dalla luce del sole

Limiti della temperatura di stoccaggio

Begränsning av förvaringstemperatur

Conservare in un luogo asciutto

Imballaggio riciclabile

Prodotto medico

Numero di lotto

Numero di catalogo

L'imballaggio deve essere gettato nella spazzatura

Il marchio "Polish Capital" sottolinea la natura locale del prodotto.

Prodotto senza sostanze chimiche

Prodotto raccomandato da specialisti

Prodotto delicato sulla pelle

Prodotto innovativo

Grande effetto in dispositivo piccolo

Prodotto ecologico

Prodotto ipoallergenico

Prodotto durevole

Prodotto di fornitura medica rapida



Orteza este o soluție excelentă pentru o terapie eficientă în caz de rănire sau alte afecțiuni. Produsele Reh4Mat sunt apreciate și recomandate de specialiști (medici, kinetoterapeuți) și de pacienți. Produsele noastre sunt produse în Polonia și fabricate din materiale de înaltă calitate. În cazul oricăror întrebări, nu ezitați să ne contactați: export@reh4mat.com.

INDICAȚII

Orteza asigură stabilizarea și ameliorarea trunchiului și coloanei vertebrale. Sustinerea asigură compresia și stabilizarea coloanei vertebrale toracice, lombare și sacrale. Este folosit în caz de tulburări reumatice, neurologice, ortopedice și leziuni.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNȚEȚINERE

- Produsul trebuie să fie menținut curat și utilizat conform recomandărilor producătorului.
- Curățați produsul în mod sistematic, cel puțin o dată pe lună sau mai mult de zece zile, dacă este necesar, în conformitate cu recomandările producătorului.
- Dacă produsul deține atele sau inserții laterale și este posibil să le demontați fără orice unelte, scoateți-le înainte de spălare.
- Se spală de mână în apă caldă cu săpun la temperatura de 30 ° C.
- A se utiliza când este complet uscat.
- Nu călcați, nu folosiți clor, nu curățați chimic, nu uscați în rufe.
- Păstrați-l într-o zonă uscată și curată.
- Protejați de umiditate, temperaturi extreme, lumina soarelui, uscați fara sursele de căldură

CONTRAINDICAȚII

- Produsul trebuie utilizat în conformitate cu recomandările unui medic sau kinoterapeut.
- Nu utilizați produsul într-o măsură greșită.
- Doar o măsură corect montată, în conformitate cu tabelul de dimensiuni, disponibilă pe ambalajul produsului și pe materialele informative ale producătorului, garantează eficacitatea și siguranța.
- Produsul nu trebuie utilizat de către persoane și copii cu tulburări mintale fără controlul unui tutore.
- Nu utilizați produsul la pacienții cu tulburări de superficiale sau accentuate fără supravegherea unui tutore.
- Pielea din zona în care se aplică produsul trebuie să fie curată. Controlează starea pielii și în cazul apariției leziunilor cutanate, este necesar să contactați un medic.
- În cazul varicelor, tromboza venoasă profundă (TVP), edem utilizarea ortezei este permisă numai după contactul cu medicul.
- Nu utilizați produsul decât pentru scopul său de utilizare.
- Nu utilizați produsul în caz de deteriorare sau deformare a formei.
- Nu încercați să înțrețineți singur acest produs. Interferența independentă cu proiectarea produsului poate duce la deteriorarea permanentă a sănătății utilizatorului.
- Nu utilizați accesoriile care nu sunt recomandate de producător.
- Nu utilizați produsul în apropierea unei flăcări deschise sau pe o suprafață fierbinte. Acest lucru poate răni grav utilizatorul și poate duce la deteriorarea gravă a sănătății.
- Utilizarea ortezelor în timpul nopții trebuie să se facă numai dacă acest lucru a fost prescris de medicul dumneavoastră.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Atenție! Acest manual conține informații de bază necesare pentru utilizarea corectă și sigură a produsului, întreținere și curățare.**
- Atenție! Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual. Urmărind instrucțiunile incluse în manual se ofera siguranța produsului și eficacitate. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați profesionistului dvs.**
- Atenție! Utilizarea produsului neconform manualului poate cauza probleme grave complicate.**
- Atenție! Vă rugăm să păstrați manualul pentru viitor.**
- Atenție! Verificați starea produsului. Dacă produsul este deteriorat, întrerupeți utilizarea și contactați producătorul. Doar un produs nedeteriorat și o utilizare adecvată garantează funcționarea corectă și sigură a acestuia.**
- Atenție! Producătorul este responsabil numai pentru defectele ascunse ale produsului sau daune mecanice survenite în modul natural de utilizare.**
- Atenție! Producătorul este responsabil pentru eficacitatea și siguranța produsului numai în cazul achiziționării produsului de la vânzătorul autorizat.**
- Atenție! Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea se menține sau crește, este recomandat să vă consultați medicul sau kinoterapeutul.**
- Atenție! Se folosește de un singur pacient.**
- Atenție! Produsul trebuie utilizat în conformitate cu recomandările unui medic sau fizioterapeut.**
- Înainte de prima utilizare, verificați mărimea produsului. Doar mărimea corectă garantează siguranță și eficacitate. O măsură greșită a produsului scade efectul tratamentului, crește disconfortul și poziția greșită a utilizatorului. Utilizarea corectă a corsetului în funcție de diagnosticul pus de către medic sau terapeut.
- Produsul nu trebuie utilizat de către persoane și copii cu tulburări mintale fără tutore Control.
- Pielea din zona în care se aplică produsul trebuie să fie curată. Controlează starea pielii și în cazul apariției leziunilor cutanate, este necesar să contactați un medic.
- În cazul varicelor, tromboza venoasă profundă (TVP), edem utilizarea ortezei este permisă numai după contactul cu medicul.
- Înainte de utilizare, scoateți ambalajul și accesoriile, cum ar fi hârtia, cardurile sau etichetele.
- Nu utilizați produsul decât pentru scopul său de utilizare.
- Nu utilizați produsul într-o dimensiune greșită.
- Produsul nu trebuie utilizat de către persoane și copii cu tulburări mintale fără tutore Control.
- Nu utilizați produsul în caz de deteriorare sau deformare a formei.
- Nu încercați să înțrețineți singur acest produs.
- Nu utilizați accesoriile care nu sunt recomandate de producător.



Incidentele grave care implică acest dispozitiv trebuie raportate atât [producătorului], cât și către autoritatea competentă din țara dumneavoastră.

Vă rugăm să urmați CONFIGURĂRILE incluse cu produsul.

O listă cu toate piesele de schimb disponibile este disponibilă la www.reh4mat.com, pentru produsul selectat.



Declarația că produsul îndeplinește cerințele esențiale

Produsor

Data fabricatiei

Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

ATENȚIE!

Protejați de lumina soarelui

Depozitare la umiditate indicata

Depozitare la temperature indicata

A se păstra într-un loc uscat

Ambalajul este reciclabil

Dispozitiv medical

Numar lot

Număr de catalog

Ambalajul trebuie aruncat la gunoi

Semnul „Capitală poloneză” subliniază localitatea produsului.

Produs fără substanțe chimice

Produs recomandat de specialiști

Produs prietenos cu pielea

Produs inovator

Dispozitiv minim, efect maxim

Produs ecologic

Produs hipoaergenico

Produs durabil

Produs ER



مقاوم **Reh4Mat** هي عبارة عن جهاز متقدمة ومبتكرة يتم تصنيعها بفاثق الدقة من المواد الأعلى جودة. هدفنا النهائي إرضاء المرضى.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال مع البائع أو مباشرة مع عميل **Reh4Mat** عن طريق البريد الإلكتروني: export@reh4mat.com.

دلالة

يهدف هذا المقاوم إلى إعادة الاستقرار وتقليل تحميل جذع المريض وعوده الفقري. ويوفر المقاوم الجزء الصدري والطني والعجزى للعمود الفقري. يتم استخدامه في الأمراض ذات الانضغاط واستقرار الخلفية الروماتزمية والعصبية والعظمية التقرؤية.

الصيانة والتخزين

يجب حفظ المنتج في حالة نظيفة واستخدامه وفقاً لتوصيات المصنع. قد يتلف المنتج بطريقة ملائمة للجهاز مرة واحدة على الأقل كل شهر أو أكثر من عشرة عند الضرورة وفقاً لتوصيات المصنع وضمان حفظه في حالة جيدة. - ينبغي تنظيف المنتج بطريقة منتظمة وصيانة للحفاظ عليه بعناية جيدة.

إن كانت الحبيزة تتضمن جئات جانبية أو علاقات من الممكن فكها بسهولة دون استخدام أية أدوات فينبغي قبل الغسيل، غسل يدويًا في الماء الدافئ مع الصابون بدرجة ٣٠ درجة مئوية ي -.

- يمنع التجفيف بالمشطوات الهواء الساخن، يمنع العمل كيميائياً، يمنع الكوي، يمنع التطهير بالكلور.

- يجب تخزين المنتج في غرفة نظيفة وجافة.

- يُحفظ المقاوم بعيداً عن مصدر الحرارة يُحفظ من الحرارة المرتفعة يُحفظ من الرطوبة

موانع

يجب استخدام المنتج وفقاً لتوصيات الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي.

لا تستخدم المنتج في الحجم الخطأ.

فقط الحجم المكون بشكل صحيح، وفقاً لحدود الحجم المتاح على عبوة المنتج ووثائق معلومات المصنع.

تفعل الحساسيات والألمة.

يمنع الأتي استخدام المنتج لدى الأطفال والأشخاص ذوي الوعي المحدود دون إشراف مقدم الرعاية.

ينبغي بحصة خاصة ضبط صحة استخدام المقاوم عند الأطفال والأشخاص ذوي - اضطرابات الذاكرة

والمرضى النفسيين والأشخاص ذوي اضطرابات الحس.

لا بد من الرصد المنتظم لحالة البشرة. وإن ظهرت تغيرات جلدية في أماكن تلامس المقاوم مع البشرة

ينبغي استشارة الطبيب المسؤول.

في حالة تزامن استخدام المقاوم مع وجود الدوالي أو المرور في السابق بحالات - التهاب الخثار الوريدي

العميق أو وجود مرض استسقاء الأطراف السفلية أو العلوية لا يمكن استخدام المقاوم إلا بعد

استشارة الطبيب المسؤول.

يمنع الأتي استخدام المنتج بطريقة مخالفة لوظيفته

يمنع الأتي استخدام المنتج في حالة تشويبه أو تلفه.

يمنع الأتي استخدام المنتج في حالة تشويبه أو تلفه

يمنع الأتي إجراء أية تغييرات في هيكل المنتج بنفسك.

لا تستخدم المنتج بالقرب من مصادر الاشتعال المكتشفة أو وضعه على سطح ساخن، قد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة للمستخدم وقد يؤدي إلى الإضرار بالصحة

ارتداء المقاوم لوقت الليل ممكن فقط في حالة توصيف ذلك من الطبيب المسؤول.

هام

ملاحظة! يحتوي هذا الدليل على المعلومات الأساسية اللازمة للاستخدام الصحيح والأمن للمنتج وطريقة صيانته وتنظيفه الصحيحة.

ملاحظة! قبل استخدام هذا المنتج ينبغي الإطلاع التفصيلي على التعليمات الواردة في هذه الوريوميتن اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل من استخدام المنتج بأمان وتمديد صلاحيته.

وفي حالة شكوك، يرجى استشارة طبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي.

ملاحظة! قد يؤدي تطبيق المنتج بما يخالف التعليمات الإرشادية إلى مضاعفات جسيمة.

ملاحظة! ينبغي الحفاظ على هذه التعليمات الخاصة بالمنتج لإعادة استخدامها في وقت لاحق.

تحذير! قبل كل استخدام للمنتج، تحقق من عدم وجود تلف واضح أو تشققات أو طبقات فضفاضة أو

تشوه أو عيوب أخرى قد تعرض المستخدم للخطر أثناء التشغيل.

عدم في حالة حدوث تلف للمنتج، يجب التوقف عن استخدامه وإعادته إلى عنوان الشركة المصنعة.

إتلاف المنتج واستخدامه الصحيح هما الضمان الوحيد لعمله السليم.

ملاحظة! الشركة المصنعة مسؤولة فقط عن العيوب الخفية أو الأضرار التي تنشأ أثناء الاستخدام

السليم للمنتج نتيجة لعيوب التصنيع.

ملاحظة! يحتوي هذا الدليل على المعلومات الأساسية اللازمة للاستخدام الصحيح والأمن للمنتج

وطريقة صيانته وتنظيفه الصحيحة. يرجى الحفاظ على هذا الدليل في مكان يسهل الوصول إليه.

- ملاحظة! وجود الألم يُعتبر دائماً تحذيراً. في حالة استمرار علامات الألم أو زيادة شدتها ينبغي دائماً

استشارة الطبيب المسؤول أو معالج إعادة التأهيل

تم استخدام المنتج من قبل مريض واحد فقط

ينبغي استخدام المقاوم وفقاً لتعليمات الطبيب أو أخصائي إعادة التأهيل.

لا يتم التوصل إلى النتيجة المرجوة من استخدام المقاوم إلا عند اختيار القياس

المناسب للمريض ويفور بذلك الطبيب المسؤول عنه أو البائع المتخصص أو اختصاصي إعادة التأهيل.

إن اختيار القياس غير الصحيح يقلل من فعالية العلاج وقد يسبب عدم الراحة ويؤدي إلى إضعاف وضع

الجسم أثناء الاستخدام. -.

فينبغي اختيار حجم المنتج من قبل الطبيب المعالج أو البائع المتخصص أو أخصائي إعادة التأهيل.

- ينبغي بحصة خاصة ضبط صحة استخدام المقاوم عند الأطفال والأشخاص ذوي

اضطرابات الذاكرة والمرضى النفسيين والأشخاص ذوي اضطرابات الحس.

- ينبغي أن تكون البشرة نظيفة في مكان تطبيق المقاوم (لا يجب استخدام مراهم أو

كريمات أو رفادات طبية قبل ارتداء المقاوم).

لا بد من الرصد المنتظم لحالة البشرة. وإن ظهرت تغيرات جلدية في أماكن تلامس المقاوم مع البشرة

ينبغي استشارة الطبيب المسؤول.

- في حالة تزامن استخدام المقاوم مع وجود الدوالي أو المرور في السابق بحالات

التهاب الخثار الوريدي العميق أو وجود مرض استسقاء الأطراف السفلية أو العلوية لا يمكن استخدام

المقاوم إلا بعد استشارة الطبيب المسؤول.

- قبل الاستخدام، قم بإزالة جميع العيوب (الورق والبلاستيك) وعلامات التثبيت المراد قطعها وعلامات

الكروتون.

- يُمنع الأتي استخدام المنتج بطريقة مخالفة لوظيفته.

- يُمنع الأتي استخدام المنتج في قياس غير مناسب.

- يُمنع الأتي استخدام المنتج لدى الأطفال والأشخاص ذوي الوعي المحدود دون إشراف مقدم الرعاية.

- يُمنع الأتي استخدام المنتج في حالة تشويبه أو تلفه.

- يُمنع الأتي محاولة تصليح المنتج بنفسك.

يمنع الأتي إجراء أية تغييرات في هيكل المنتج بنفسك.

يمنع الأتي استخدام الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة.

⚠️

يجب تسجيل الأحداث الخطيرة المتعلقة بهذا الجهاز وتقديمه إلى كل من (المصنع) وإلى الجهة المختصة في بلدك.

يرجى إتباع الإعدادات المرفقة مع هذا الجهاز.

www.reh4mat.com فأنامة بكافة قطع الغيار المتاحة على الموقع الإلكتروني للمنتج المحدد.

	إقرار بأن المنتج يتوافق مع الشروط والمتطلبات الأساسية
	المصنع
	تاريخ الإنتاج
	يرجى قراءة التعليمات الموضحة في دليل المنتج قبل الاستخدام
	يرجى قراءة التعليمات الموضحة في دليل
	حماية من أشعة الشمس
	حفظ المنتج في الرطوبة المناسبة
	تحديد درجة حرارة حفظ المنتج
	يحفظ في مكان جاف
	هذه العبوة قابلة لإعادة التدوير
	جهاز طبي
	رقم الدفعة
	رقم الكatalog
	يجب إلقاء هذه العبوة في القمامة
	علامة "العاصمة البولندية" تؤكد على الصنع المحلي للمنتج
	منتج خالي من المواد الكيميائية
	منتج موصى به من قبل المتخصصين
	منتج صديق للجلد
	منتج ابتكاري
	منتج صغير ووظيفة عمل كبيرة
	منتج صديق للبيئة
	منتج ضعيف التأثير
	منتج صلب
	(ER) منتج إطلاق مستمر